

Deta
Elis
Holding

Gesundheit
Innovationen
Mensch

Gerät
für umfassende Gesundung

DeVita Combi

Bedienungsanleitung • Datenblatt

Languages

Deutsch.....3
English.....25
Ελληνικά.....47
Русский.....69

Deta-Elis Europa GmbH

Auflage 1

Gerät
für umfassende
Gesundung

DeVita Combi

Bedienungsanleitung • Datenblatt

Funktion

Das Gerät für umfassende Gesundung (nachfolgend Gerät genannt) wird für Befreiung des Menschen von der Stressbelastung verwendet, die durch Anwesenheit im Körper parasitärer Formen, wie: Viren, Bakterien, Pilzen, Protozoen, Helminthen – hervorgerufen wurde, sowie für Schutz gegen Stressfaktoren, für Aufrechterhaltung der Homöostase, für Steigerung körperlicher Leistungsfähigkeit, und für Vorbeugung vorzeitiger Alterung.

Das Gerät besteht aus 5 Einheiten

Die AP Einheit

Die Wirkung der Einheit basiert auf Studienergebnissen des Ingenieurs R. Rife und seiner Anhänger. Jedes Lebewesen hat seine eigene elektromagnetische Strahlung. Die von der Einheit erzeugten Wellen bestimmter Frequenz treten in Resonanz mit der eigenen Ausstrahlung der Mikroorganismen und verstärken ihre natürlichen Schwingungen, die dadurch auf die Parasiten zerstörend zu wirken beginnen. Die AP Einheit emittiert eigene Schwingungsfrequenzen für bestimmte Arten von Viren, Bakterien, Helminthen, Protozoen und Pilzen, und ermöglicht eine Tiefreinigung und Befreiung des Körpers von Toxinen.

Die RITM Einheit

Die Wirkung der Einheit basiert auf Studien der Gelehrten R. Voll, H. Schimmel, A.F. Kramer, die elektromagnetische Schwingungen des Organismus erforschten. Es wurde festgestellt, dass jedes Organ seine eigenen Schwingungen hat, die sich bei geschwächten Organen von den der gesunden Organe unterscheiden. Die Einheit emittiert geringe Bioresonanzfrequenzen für verschiedene Organe und Systeme, die die Schwingungen gesunder Organe nachahmen. Die Wirkung dieser Frequenzen „stimmt den Körper auf eine gesunde Welle ein", wodurch die Anpassungsreserven gesteigert und die Selbststeuerungsprozesse wiederhergestellt werden.

Die QUANT Einheit

Die Wirkung der Einheit auf den Körper basiert auf Verwendung sichtbarer und infraroter Lichtquellen, die auf verschiedene Hautbereiche des menschlichen Körpers lokal einwirken.

Die Einheit hilft viele Gesundheitsprobleme loszuwerden, indem sie das bioenergetische Potenzial des Körpers regelt.

Die HV Einheiten

Die Einheiten befinden sich im Inneren des Gerätes. Die Elektroakupunktur-Einheiten HV STEP und HV RAMPING wirken auf den Körper mit elek-

trischen Impulsen, die verschiedene pathologische Zustände beseitigen.

Achtung! Das Gerät darf von Kindern nur unter Aufsicht von Erwachsenen verwendet werden. Kindern ist es nicht erlaubt, mit dem Gerät zu spielen. Personen mit körperlichen oder geistigen Behinderungen dürfen das Gerät nur unter der Aufsicht von geeignetem Personal benutzen.

Lieferumfang


Das Gerät „DeVita COMBI“ ..... 1 St.
Die AP Antenne (Abb.1) ..... 1 St.
Die RITM Antenne (Abb. 2) ..... 1 St.
Das QUANT Zusatzgerät (Abb. 3) ..... 1 St.
Elektroden für Hände (Abb. 5) ..... 2 St.
Elektroden für Füße (Abb. 6) ..... 2 St.
Ein Kabelsatz (Abb. 7) ..... 1 St.
Ein Netzteil (Abb. 4) ..... 1 St.
Eine Transport- und Aufbewahrungstasche für das Gerät ..... 1 St.
Bedienungsanleitung/Datenblatt ..... 1 St.




Abb. 1 Die AP Antenne



Abb. 2 Die Ritm Antenne

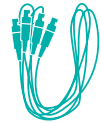

1

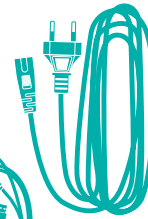

2



Abb. 3 Das QUANT Zusatzgerät

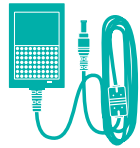


Abb. 4 Das Netzteil



3



Abb. 5 Die Elektroden für Hände



Abb. 6 Die Elektroden für Füße



4

Abb. 7 Der Kabelsatz

Kenndaten

Die AP Einheit

Form des Ausgangssignals.....bipolare Impulspakete

Frequenzbereich, Hz.....0,1 – 72000

Höchstfehler der Frequenzeinstellung, höchstens, %.....±0,01

Trägerfrequenz, MHz.....27

Außenabmessungen der Antenne, höchstens, mm.....
.Durchmesser.....110

Gewicht der Antenne, höchstens, kg.....0,1

Die RITM Einheit

Form des Ausgangssignals.....bipolare Impulspakete

Frequenzbereich, Hz.....0,1 – 1000

Höchstfehler der Frequenzeinstellung, höchstens, %.....±0.01

Trägerfrequenz, kHz.....10

Außenabmessungen der Antenne, höchstens, mm.....
Durchmesser.....110

Gewicht der Antenne, höchstens, kg.....0,1

Die QUANT Einheit

Impulsfolgefrequenzbereich, Hz.....0,1 – 1000

Höchstfehler der Frequenzeinstellung, höchstens, %.....±0.01

Optischer Bereich, nm.....468,525,590, 660, 880

Speisung:

- Akkumulator Li-Pol 3,7 V, St.....1

- Dauerbetriebszeit der Batterie, höchstens, Stunden.....10

- maximale Ladezeit des Akkumulators, Stunden.....8

Außenabmessungen, höchstens, mm.....95 x 45 x 25

Gewicht, höchstens, kg.....0,1

Die Elektroakupunktur-Einheiten HV STEP und HV RAMPING

Form des Ausgangssignals.....Positives Rechtecksignal, negatives Rechtecksignal, positives Rechtecksignal mit hyper-

bolischer Dämpfung, negatives Rechtecksignal mit hyperbolischer Dämpfung

Maximale Impulsamplitude, mindestens, V.....200

Impulsdauer im Bereich 0,5, ms.....1

Frequenzbereich, Hz.....0,1 - 100

Höchstfehler der Frequenzeinstellung, höchstens, %.....±0.01

Netzteil:

Netzadapter.....GSM18B05-P1J 220V\50Hz, 5V\3A

Das Gerät „DeVita Combi“

Tastaturtyp.....Touch-Keyboard

Bildschirmtyp.....TFT 240x320

Außenabmessungen höchstens, mm..... 240x185x104

Gewicht:

ohne Zubehör und Ersatzteile, höchstens, kg 0,8

Der Komplettsatz, höchstens, kg.....2,5

Betriebsbedingungen:

Umgebungstemperatur.....von 10 bis 35 °C

Relative Luftfeuchtigkeit.....80% bei der Temperatur 25 °C

Durchschnittliche Lebensdauer mindestens, Jahre.....5

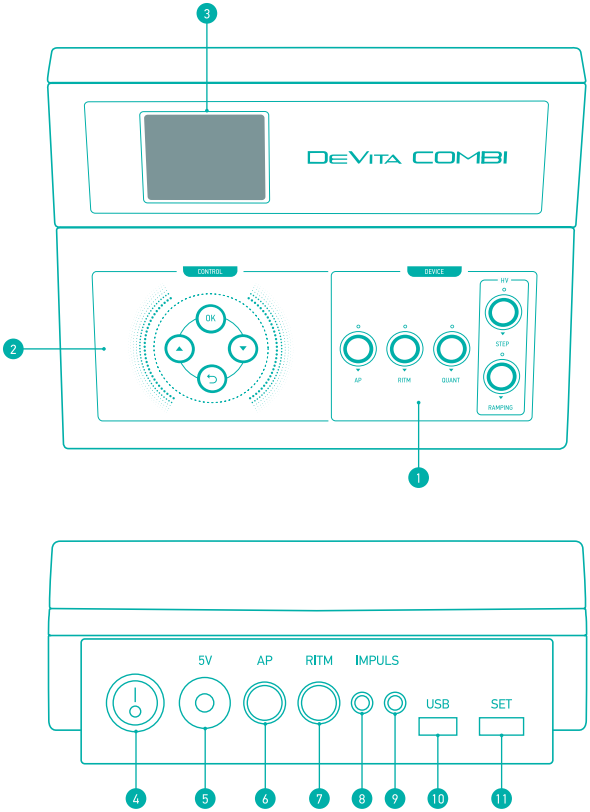


Abb. 8 Geräteübersicht: Ansicht von vorne (oben), Ansicht von hinten (unten)

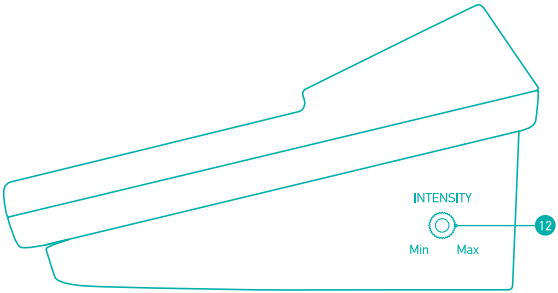


Abb. 9 Geräteübersicht (Ansicht von rechts)

Bestandteile des Gerätes

1. Systemsteuerung „DEVICE“
2. Systemsteuerung „CONTROL“
3. Bildschirm
4. Power-On Schalter
5. „+5V“ Anschluss für Fremdstromversorgung
6. Anschluss für die AP Antenne
7. Anschluss für die RITM Antenne
8. Elektrodenanschluss an den Minuspol der HV Einheit (schwarz)
9. Elektrodenanschluss an den Pluspol der HV Einheit (rot)
10. Micro-USB - für den Anschluss an den PC
11. SET – Anschluss zur Einstellung der Adresse des QUANT Zusatzgerätes via Bluetooth
12. INTENSITY – der Impulsamplitudenreglergriff für HV Modus

Betriebsbedingungen

1. Benutzen Sie keinen Spiritus bzw. keine anderen organischen Lösungsmittel zum Reinigen der Geräteoberflächen; um eventuelle Verschmutzungen zu ent- fernen wischen Sie das Gerät behutsam mit weichem Pinsel oder mit einer leicht mit Wasser angefeuchteten Watte ab.

2. Halten Sie das Gerät nicht neben zu warmen, staubigen, oder feuchten Stellen.

3. Nachdem das Gerät in einem kalten Raum gelagert worden ist bzw. nachdem es im Winter transportiert worden ist, soll man es vor dem Einschalten mindestens für 1 (eine) Stunde bei Raumtemperatur stehen lassen.

Vorbereitung des Gerätes für den Betrieb

1. Das Netzteil an den „5V" Stromanschluss des Gerätes anschließen.

Das Netzteil mit dem Kabel Nr.2 an eine 220-V-Steckdose anschließen.


2. Das Netzteil in eine 220-V-Steckdose stecken. Den Power-On Schalter (Nr.4 in der Abb.8) drücken. Dabei werden die Anzeige einer der Einheiten und der Bildschirm auf der Systemsteuerung „DEVICE" aufleuchten.


3. Die AP und/oder Ritm Antennen mit den Kabeln Nr.1 an das Gerät anschließen. Mit dem Kabel Nr.4 die Elektroden (für Hände oder für Füße) anschließen. Die Kabelnummern sind in der Abbildung 7 dargestellt.

4. Den „INTENSITY" Griff auf „MIN" stellen.

Betrieb des Gerätes


Nach dem Einschalten des Gerätes erscheint auf dem Bildschirm Information über den Typ der gewählten Einheit und auf der Systemsteuerung „DEVICE“ leuchtet die Anzeige der entsprechenden Einheit auf. Um eine andere Einheit zu wählen, benutzen Sie die Auswahltasten auf der Systemsteuerung „DEVICE“.

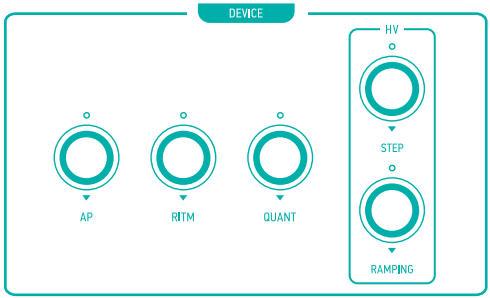

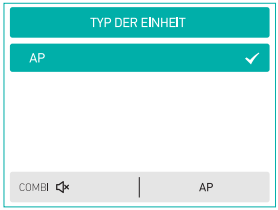


Im unteren Teil des Bildschirms werden Informationen über den Zustand des akustischen Strahlers, sowie Informationen über den Typ der gewählten Einheit angezeigt.

Betrieb der AP Einheit

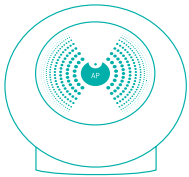


Die AP Einheit enthält eine Antenne, die über ein Kabel gesteuert wird.

Schließen Sie die AP Antenne mit dem Kabel Nr. 1 an den „AP“ Anschluss an der Rückseite des Gerätes „DeVita Combi“ an (siehe Abb. 8).

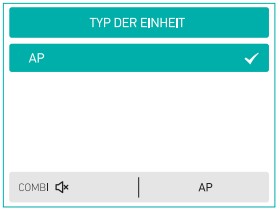

Drücken Sie die „AP“ Taste auf der „DEVICE“ Leiste.

OK Um den Betrieb fortzusetzen, drücken Sie die „OK“ Taste auf der „CONTROL“ Leiste.

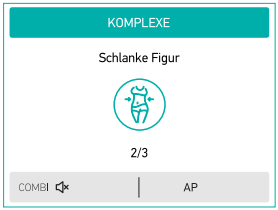

Es erscheint ein Auswahlfenster der Komplexe.

In dem Fenster werden die Bezeichnung des Komplexes, dessen Symbol, die Nummer des aktuellen Komplexes und die Gesamtanzahl der Komplexe angezeigt.

Um einen Komplex zu wählen, benutzen Sie die Bewegungstasten auf der „CONTROL“ Leiste.




Mit einem Klick auf die Taste „OK“ erscheint ein Auswahlfenster von Programmen auf dem Bildschirm.

Der Auswahl eines Programms erfolgt mithilfe der Bewegungstasten auf der „CONTROL“ Leiste.


Mit einem Klick auf die „OK“ Taste wird die Programmausführung gestartet.

Vor dem Starten überzeugen Sie sich, dass die AP Antenne angeschlossen ist.

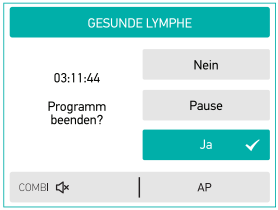

Das Programmstartfenster enthält die Bezeichnung des Programms, die Restzeit bis zum Programmende und das Bedienmenü des Programms. Beim Starten des Programms wird eine LED an der AP Antenne aufleuchten. Sie zeigt, dass die Antenne richtig angeschlossen ist.


Beim Wählen der Option „Pause“ und Drücken der „OK“-Taste wird die Programmausführung vorläufig eingehalten. Dabei wird auf dem Bildschirm die Zeit bis zur Beendigung der Pause angezeigt.

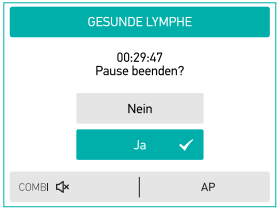

Die Pause kann durch die Wahl der Option „Ja“ und das Drücken der „OK“-Taste beendet werden, danach wird das Programm weiter ausgeführt.

Wenn die Pause aktiv ist, und die Option „Ja“ währenddessen nicht gewählt wird, dann wird das Programm nach dem Ablauf der Pausenzeit automatisch gestoppt. Und die Einheit öffnet das Programmauswahlfenster.


Betrieb der Ritm Einheit

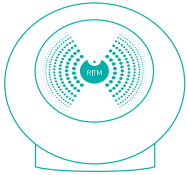

Die RITM Einheit enthält eine Antenne, die über ein Kabel gesteuert wird.


Schließen Sie die RITM Antenne mit dem Kabel Nr. 1 an den „RITM“ Anschluss an der Rückseite des „DeVita Combi“ Gerätes an (siehe Abb. 8).

Drücken Sie die Taste „RITM“ auf der „DEVICE“ Leiste.

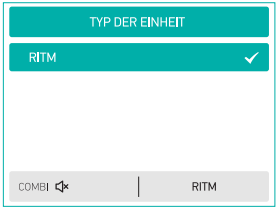

Weiter wird die RITM Einheit analog zu der AP Einheit betrieben.

Betrieb der QUANT Einheit

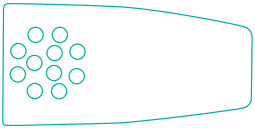

Die QUANT Einheit wird durch ein externes Zusatzgerät über den drahtlosen Bluetooth Kanal betrieben. Die Nummer des Quanten-Applikators muss mit der Gerätenummer übereinstimmen! Um mit dem Betrieb anzufangen, drücken Sie auf die Taste „QUANT“ auf der „DEVICE“ Leiste.



Die QUANT Einheit kann in zwei Modi betrieben werden: selbständig bzw. zusammen mit der RITM Einheit. Um den entsprechenden Modus zu wählen, benutzen Sie die Bewegungstasten auf der „CONTROL“ Leiste. In der unteren rechten Ecke wird der Batteriestand des QUANT Zusatzgerätes angezeigt.



Beim Fehlen der Verbindung über Bluetooth erscheint die Meldung „Keine Verbindung mit Gerät“ auf dem Bildschirm und die Batterieabbildung ändert sich.

Beim Fehlen der Verbindung ist es unmöglich zum Auswahl der Komplexe zu übergehen.

Die Auswahl der Komplexe bzw. Programme erfolgt analog zu der Vorgehensweise, die für die AP Einheit beschrieben wurde.

Beim Wählen des Modus QUANT+RITM muss man sicherstellen, dass die RITM Antenne angeschlossen ist.

Betrieb der HV Einheiten


Die Einheiten enthalten einen Impulsgenerator, der sich innerhalb vom „DeVita Combi“ Gerät befindet, und Elektroden für Hände und Füße.

Die Elektroden werden mit Kabeln Nr. 4 an die Anschlüsse HV(+ rot)(- schwarz) an der Rückwand des Gerätes angeschaltet (siehe Abb. 8).

Mithilfe von dem Einstellgriff „INTENSITY“ an der rechten Gehäusewand des Gerätes (siehe Abb. 9) wird die Impulsamplitude eingestellt.

Die HV Einheiten können in zwei Modi betrieben werden: selbständig und zusammen mit der RITM Einheit.

Um die HV STEP Einheit oder die HV RAMPING Einheit zu wählen – drücken Sie die entsprechende Taste auf der „DEVICE“ Leiste.

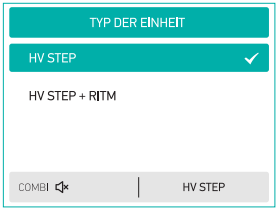




Die Auswahl der Komplexe bzw. Programme erfolgt analog zu der Vorgehensweise, die für die AP Einheit beschrieben wurde.

Betrieb des Einstellmodus


Um in den Einstellmodus zu übergehen drücken Sie die Rückstelltaste.

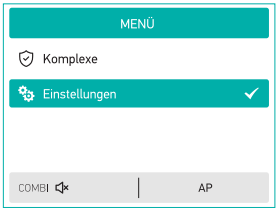

Mithilfe von Bewegungstasten wählen Sie den Titel „Einstellungen“ und drücken Sie „OK“ auf der „CONTROL“ Leiste.


Auf dem Bildschirm erscheint das Einstellungsfenster.

Sprachauswahl

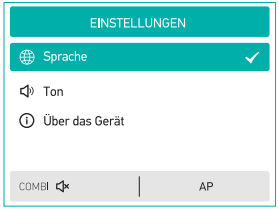


Mithilfe von Bewegungstasten wählen Sie den Titel „Sprache“. Drücken Sie die Taste „OK“.

Auf dem Bildschirm erscheint das Menü der Spracheinstellungen.

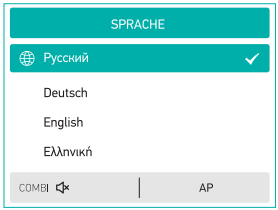


Mithilfe von Bewegungstasten wählen Sie die nötige Sprache. Drücken Sie die „OK“ Taste.

Toneinstellungen

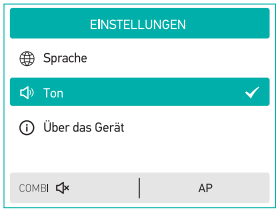

Mithilfe von Bewegungstasten in dem Einstellungsmenü wählen Sie den Titel „Ton“. Drücken Sie die Taste „OK“.

Auf dem Bildschirm erscheint das „Ton“ Menü.

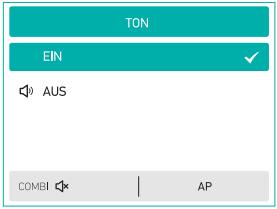

Mithilfe von Bewegungstasten wählen Sie den Titel „EIN“ oder „AUS“. Drücken Sie die „OK“ Taste.

Beim Wählen des Titels „AUS“ wird die Tonbegleitung vom Tastendruck ausgeschaltet.

Über das Gerät



Mithilfe von Bewegungstasten wählen Sie den Titel „Über das Gerät“. Drücken Sie die „OK“ Taste.

Auf dem Bildschirm erscheinen: die Nummer Ihres Gerätes und die Programmversion.

Einstellungsmenü beim Benutzen der QUANT Einheit



Beim Benutzen der QUANT Einheit erscheint eine zusätzliche Option im Einstellungsme- nü: „Anschluss“.

Die Option ist für Einstellung der Verbindung des neuen Quant Zusatzgerätes über den Bluetooth Kanal bestimmt (bei Verlust oder Ausfall des mitgelieferten Zusatzgerätes).

Für Einstellung schließen Sie das QUANT Zusatzgerät an den „SET“ Anschluss am Rückwand des „DeVita Combi“ Gerätes mit dem Kabel Nr.3.



Auf dem Bildschirm des Gerätes wählen Sie mithilfe von Bewegungstasten die Option „Anschließen“

Drücken Sie die Taste „OK“.



Bei einem erfolgreichen Anschluss erscheint auf dem Bildschirm die Meldung „QUANT CONNECT!“.

(Es wird nicht zugelassen mehr als eine (1) Zusatzgerät anzuschließen).



Um ein unbenutztes QUANT Zusatzgerät zu blockieren hat man es (gemäß der oben beschriebenen Vorgehensweise) an das Gerät anzuschalten und die Option „Freischalten“ zu wählen.

Nach dem Abschluss des Verfahrens muss die Meldung „QUANT NO CONNECT!“ auf dem Bildschirm erscheinen.

Ladung der QUANT Einheit

Ladeanzeige des Akkumulators

In der QUANT Einheit befindet sich ein Akkumulator.

Der Ladestatus kann an der Ladeanzeige im unteren Teil des Bildschirms abgelesen werden.

Wenn die Anzeige des Gerätes rot ist – darf die Einheit nicht betrieben werden.

Der Akkumulator wird über einen Computer oder einen Netzadapter mit Kabel Nr. 3 geladen.



Dabei erscheint das Ladesymbol („Blitz“) rechts von der Ladeanzeige.

Sicherheitsinformation

Das Gerät ist:

- nichttoxisch;

- nicht leicht entzündbar;

- nicht explosionsgefährdet;

Bei der Akku-Aufladung sind Geräte der III. Klasse ausschließlich mit einem Netzwerkadapter mit ungefährlicher Niederspannungsversorgung einzuspeisen.

Umweltschutz

Der eingebaute Akkumulator enthält Stoffe, die die Umwelt verunreinigen. Nach dem Ablauf der Lebensdauer des Gerätes und bevor es entsorgt wird, muss der Akkumulator aus dem Gerät entfernt werden. Der Akkumulator soll an einer speziellen Stelle entsorgt werden. 

Sicherheitshinweise

ACHTUNG: Schließen Sie an das Gerät kein Netzteil, dessen Netzkabel Beschädigungen aufweist.

Versuchen Sie nicht, das Gerät selbständig zu reparieren. Beim Entstehen eventueller Störungen wenden Sie sich an Servicestellen.

ACHTUNG: Eine direkte Einwirkung der QUANT Einheit auf Sehorgane kann unangenehme Empfindungen verursachen.

ACHTUNG: Um zufällige Einwirkung beim Stromeinschalten zu vermeiden soll der „INTENSITY" Griff auf MIN gestellt sein.

Aufbewahrung

Das Gerät ohne Verpackung soll drinnen bei Temperaturen von 10 bis 35 °C und bei maximal 80% relativer Feuchtigkeit aufbewahrt werden.

Um eventuelle Unterbrechungen zu vermeiden, empfehlen wir das Netzteil vom Gerät getrennt zu halten. Es wird empfohlen die Originalverpackung während der Garantiefrist aufzuheben.

Transport

Da das Gerät einen Bildschirm enthält, der gegen äußere mechanische Einflüsse empfindlich ist, wird beim Transport folgendes empfohlen:

- das Gerät vor Schütteln, Stößen und Schlägen zu schützen;
- das Gerät nicht fallen zu lassen;
- keine Gegenstände auf das Gerät fallen zu lassen.

Das Gerät soll vor Feuchtigkeit und chemischen Wirkstoffen geschützt werden.

Herstellergarantie

Der Hersteller garantiert, dass das Gerät für umfassende Gesundung „DeVita Combi" der Spezifikation entspricht, sofern die Bedienungsanleitung, sowie die Transport- und Aufbewahrungsvorschriften vom Benutzer befolgt werden.

Die Garantiedauer für das Gerät beträgt 24 Monate ab Kaufdatum im Einzelhandel.

Bei fehlendem Verkaufsdatumvermerk und bei fehlendem Händlerstempel auf der Garantiekarte wird die Garantiedauer vom Herstellungsdatum der Einheit berechnet.

Während der Garantiedauer hat der Besitzer Anspruch auf kostenlose Reparatur des Gerätes; dabei soll er die Garantiekarte vorlegen.

Die Garantiereparatur wird auf dem Betriebsgelände des Herstellers durchgeführt. Die Kosten für den Transport des defekten Gerätes übernimmt der Käufer.

Sollten die Garantiekarte und die Abnahmebescheinigung nicht vorgelegt werden, bzw. die angebrachten Garantiesiegel von der Einheit beschädigt werden, dann werden keine Reklamationen akzeptiert und keine Garantiereparatur durchgeführt.

Diese Garantie gilt nicht bei folgenden Störungen:

- Bei Mängeln durch unsachgemäße Benutzung;
- Bei Defekten, die durch Naturkatastrophen verursacht wurden;
- Wenn Garantiesiegel vom Gerät beschädigt werden;
- Wenn das Gerät äußere Schäden aufweist (Risse, Kratzer usw.).

Der Käufer hat Anspruch auf Ersatz eines fehlerhaften Gerätes durch ein neues in folgenden Fällen:

- das Gerät wurde während der Garantiefrist dreimal repariert,
- das Gerät ist irreparabel.

Die Garantiekarten werden beigelegt.

Complete Recovery
All-In-One Device

DeVita Combi

User Manual • Warranty Document

Purpose of the Device

The all-in-one device for complete recovery is designed to eliminate the strain caused by various intruders in the human body: viruses, bacteria, fungi, protozoa, and helminths. It also shields against stressors, maintains homeostasis, enhances performance, and combats premature aging.

The device works in 5 different fields of action

DeVita AP

The operation of the AP device is rooted in the pioneering research of engineer R. Rife and subsequent advancements by his successors. Each living organism possesses a unique electromagnetic signature. The device reproduces waves at specific frequencies, corresponding to the inherent frequency of target microorganisms. These waves penetrate the body, resonate with the microorganisms' frequencies to amplify their natural oscillations. The resulting powerful oscillations have detrimental effects on pathogenic microorganism and parasites. The external AP unit emits waves at precise frequencies tailored to various types of viruses, bacteria, helminths, protozoa, and fungi, facilitating thorough detoxification of the body.

DeVita RITM

The operation of the Ritm device based upon extensive research conducted by R. Voll, H. Schimmel, AF Kramer, and other distinguished scientists. Their findings indicate that each healthy organ has a distinct frequency, which differs from that of a weakened counterpart. Consequently, the device emits low-intensity frequencies tailored to various organs and systems, mirroring those of healthy organs. These frequencies effectively "reprogram" the body towards a harmonic range of healthy frequencies, thereby enhancing adaptive reserves and restoring self-regulatory processes.

QUANT

The device's impact on the body is based on research within the field of quantum theory of light. Visible light comprises a wide spectrum of colors, each with unique wavelengths and frequencies. These colors can affect specific organs or systems through skin sensors, based on the principles of light interaction with biological tissues.

HV electrotherapy

The device operates by utilizing electrical pulses or impulses, offering HV STEP and HV RAMPING electrotherapy modes for the treatment of various pathological conditions. These operating options are integrated directly into the device for ease of use.

Caution! The device may only be used by children under adult supervision. Children are not allowed to play with the device. Persons with physical or mental disabilities may use the device only under the supervision of appropriate personnel.

Package contents


All-in-one device "DeVita COMBI"..... 1 pc.
External AP unit (anti-parasitic action fig. 1)..... 1 pc.
External RITM unit (regulatory action fig. 2)..... 1 pc.
External QUANT unit (fig. 3)..... 1 pc.
Hand electrodes (fig. 5)..... 2 pcs.
Foot electrodes (fig. 6)..... 2 pcs.
Cable set (fig. 7)..... 1 pc.
External Power supply unit (fig. 4)..... 1 pc.
Bag for carrying and storing the device..... 1 pc.
User Manual / Warranty Document (passport)..... 1 pc.




Fig. 1 Ext. AP unit



Fig. 2 Ext. Ritm unit

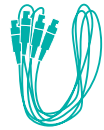

1

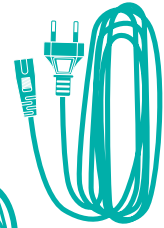

2



Fig. 3 Ext. QUANT unit

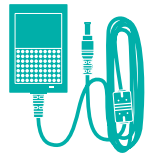


Fig. 4 Power supply unit



3



4

Fig. 7 Cable set



Fig. 5 Hand electrodes



Fig. 6 Foot electrodes

Technical Specifications

External AP unit

Output waveform ..... Sinusoidal

Frequency range, Hz ..... 0,1 – 72000

Maximum frequency adjustment error, not more than, % ..... ±0.01

Carrier frequency, MHz 27

Overall dimensions, not more than, mm .....
Diameter 110

Weight, not more than, Kg 0,1

External RITM unit

Output waveform ..... Sinusoidal

Frequency range, Hz ..... 0,1 – 1000

Maximum frequency adjustment error, not more than, % ..... ±0.01

Carrier frequency, kHz 10

Overall dimensions, not more than, mm .....
Diameter 110

Weight, not more than, Kg 0,1

QUANT unit

Variation of repetitive pulses, Hz ..... 0,1 – 1000

Maximum frequency adjustment error, not more than, % ..... ±0.01

Optical range, MHz 468,525,590, 660, 880

Power supply:

- battery Li-Pol 3.7V, pcs 1
- continuous battery operation time, not more than, hours 10
- maximum battery charge time, hours 8

Overall dimensions, not more than, mm ..... 95 x 45 x 25

Weight, not more than, Kg 0,1

HV STEP and HV RAMPING Electrotherapy

Shape of the output signal: pulses square positive or negative and pulses square positive or negative with hyperbolic attenuation

Maximum pulse width, not less than, V.....200
Pulse duration at the level of 0.5, ms.....1
Frequency range, Hz.....0,1 - 100
Maximum frequency adjustment error, not more than, % .....±0.01

Power supply unit:

AC - DC adapter.....GSM18B05-P1J 220V\50Hz, 5V\3A

Device “DeVita Combi”

Keyboard Type.....touch sensor
Screen Type.....TFT 240x320
Overall dimensions, not more than, mm..... 240x185x104
Weight:
without peripherals and accessories, not more than, kg.....0,8 in
Complete set, not more than, kg.....2,5

Operating conditions:

Ambient temperature.....from 10 to 35˚C
Relative humidity.....80% at a temperature of 25˚C
Shelf life, not less than, years.....5

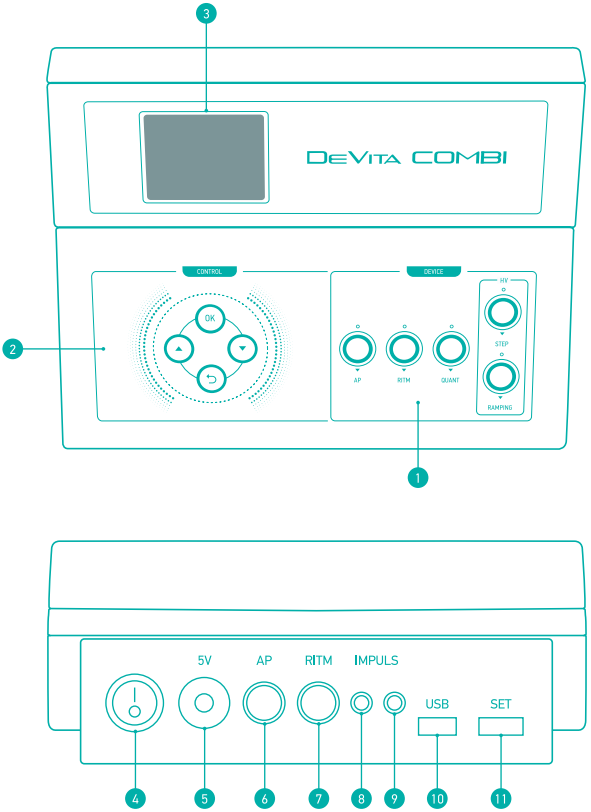


Fig. 8 External appearance of the device:
front view (top), back view (bottom)

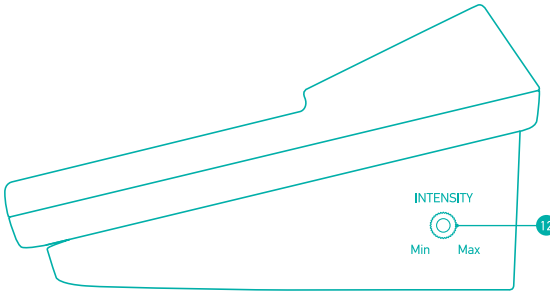


Fig. 9 External appearance of the device
(right side view)

Device composition

1. “DEVICE” Action Selection Panel
2. “CONTROL” panel
3. Display
4. Power ON/OFF switch
5. External power supply connection port (“DC 5V “)
6. External AP module unit connection port
7. External RITM unit connection port
8. HV electrode connection port “-” (black)
9. HV electrode connection port “+” (red)
10. Micro-USB port for connection to a computer.
11. USB type A — for setting-up and charging the QUANT unit
12. INTENSITY — control knob to adjust the pulse amplitude of HV unit.

Terms of use

1. Do not wipe the surface of the device with alcohol and other organic solvents, remove the dirt with light movements with a soft brush or a cotton swab slightly dampened with water.

2. Avoid positioning the device in close proximity to excessively hot, dusty, or humid environments.

3. Following storage in a cold room or transition to winter conditions, allow the device to acclimate to room temperature for at least one hour before attempting to activate it.

Preparing the device for operation

1. Connect the power supply to the "5V", power port (No. 5 in Fig. 8) of the device. With cable No. 2, connect the power supply to a 220V outlet.


2. Press the ON-OFF switch (No. 4 in Fig. 8), while the indicator LED of one of the modes (actions) and the display (No. 3 in Fig. 8), will light up.


3. Connect the AP and/or RITM external units to the device with cables No.1. Connect the electrodes (hand or foot) to cables No. 4. Cables numbers are shown in Figure 7.

4. Set the INTENSITY control knob to the MIN position.

Using the device


After activating the device, the screen will display information about the type of action selected and the corresponding function indicator will light up on the “DEVICE” panel. To change the action unit, use the action selector buttons on the “DEVICE” panel.

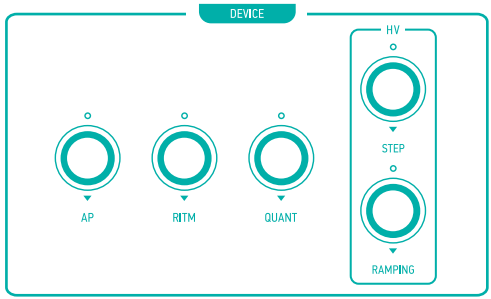

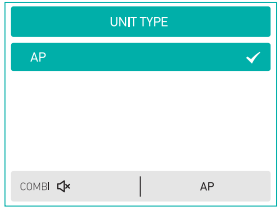


The bottom of the screen includes information about the volume status as well as information about the type of action unit selected.

Working with the external AP unit

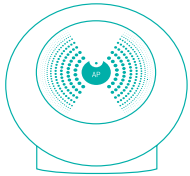


The external “AP” unit is connected and controlled via a cable. Connect the external “AP” unit with cable No. 1 to the “AP” port on the back of the “DeVita Combi” device (see Fig. 8).

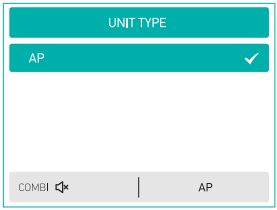

Press the ‘AP’ button on the “DEVICE” panel.

OK

Press the ‘OK’ button on the ‘CONTROL’ panel to continue.

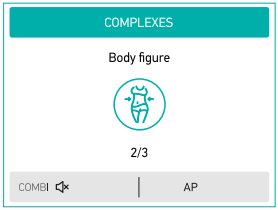


The SET of programs selection window will appear.

The window displays the current program SET name, its icon, and its number. The total number of remaining SET programs is also displayed.

To select a SET of programs, use the

“CONTROL” panel navigation buttons.

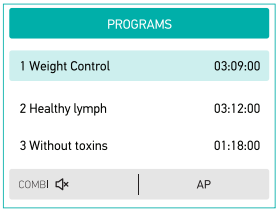


When you press the “OK” button, the program selection window will appear on the screen.

Program selection is made with the navigation buttons on the “CONTROL” panel.

When the “OK” button is pressed, the program starts.

Before starting, you need to make sure that the external AP is connected.

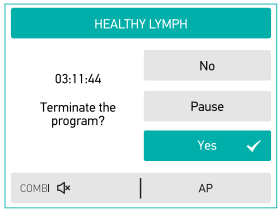

The program launch window contains the name of the program, the time remaining until its completion and a menu for managing the program's operation.

When the program starts, the LED on the AP external unit should light up indicating that the unit is connected correctly.

By selecting "Pause" and pressing the "OK" button, the program is temporarily stopped. In this case, the display shows the time until the end of the pause.



The pause is stopped by selecting the "Yes" option and pressing the button "OK" and then the program will continue to run.

If pause is enabled and "Yes" is not selected, then the program stops when the pause time elapses. The device switches to the program selection window.


Working with the external RITM unit



The external "RITM" unit is connected and controlled via a cable.


Connect the external "RITM" unit with Cable No. 1 in the "RITM" port on the back of the "DeVita Combi" device (see Fig. 8).

Press the “RITM” button on the “DEVICE” panel.

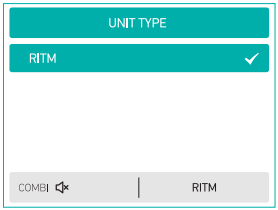


Working with the external “RITM” unit is similar to working with the external “AP” unit.


Working with the QUANT unit

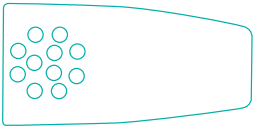

Operation with the external QUANT unit is carried out via a Bluetooth wireless channel. Ensure that the QUANT unit number matches the device number. To start, press the “QUANT” button on the “DEVICE” panel.

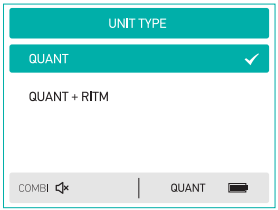

Operation with the “QUANT” unit can occur in two modes: independently or in conjunction with the “RITM” unit. Navigate using the buttons on the “CONTROL” panel to select your desired mode. The battery status of the external “QUANT” unit is indicated in the lower right corner for easy monitoring.

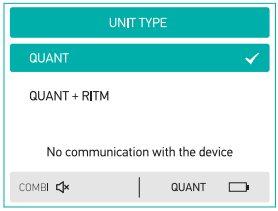

If there is no connection via Bluetooth, the message “No connection to the device” appears on the screen and the battery image changes.

Without a connection, accessing the SET program selection becomes impossible.

To choose SET programs or select programs, follow the same procedure as described for the external “AP” unit.

When the “QUANT+RITM” mode is selected, ensure the connection of the external “RITM” unit is verified.

Working with the HV unit


The device includes an electrical pulse generator, located inside the ‘DeVita Combi’ device, and external hand and foot electrodes.


The electrodes are connected with the cables No. 4 to the HV (+red, -black) connectors on the back side of the device (see Fig. 8).

The “INTENSITY” control knob, located on the lower right side of the device (see Fig. 9), adjusts the amplitude of the pulses.

The “HV” unit has the capability to operate independently or in conjunction with the external “RITM” unit. In such instances, the “HV” unit offers two operational modes: “HV STEP” (with stepping pulses) and “HV RAMPING” (with accelerating pulses).

To switch between the “HV STEP” and “HV RAMPING” modes, simply press the corresponding button on the “DEVICE” panel.

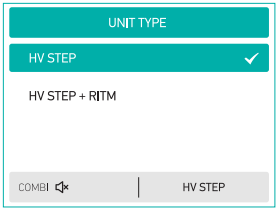


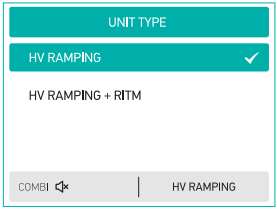

The selection of SET programs and programs is carried out similarly to the method described for the external "AP" unit.

Settings Section


To go to the settings menu, press the "back" button.

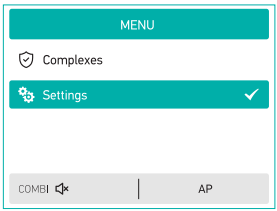

Use the navigation buttons to select "Settings" and press "OK" on the "CONTROL" panel.


The settings selection menu will appear on the screen.

Language selection

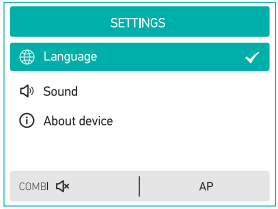


Use the navigation buttons to select ‘Language’. Click the ‘OK’ button.

The language settings menu appears on the screen.

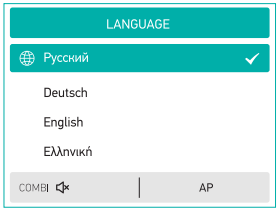


Use the navigation buttons to select the desired language. Click the ‘OK’ button.

Sound Setting

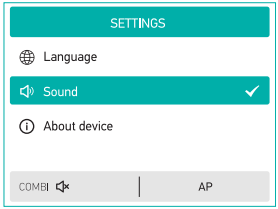


Use the navigation buttons in the settings menu to select “Sound”. Press the “Okay” button.

The “Sound” menu appears on the screen.

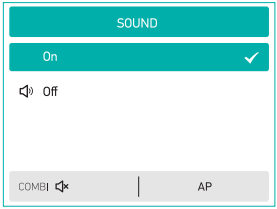

Use the navigation buttons to select “On” or “Off”. Click the ‘OK’ button. Selecting “Off” the sound of the keys will be muted.


About the device

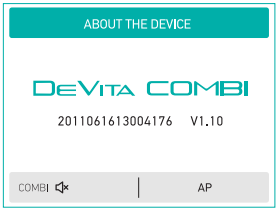

Use the navigation buttons to select “About the Device”. Click the ‘OK’ button.

Your device build-in number and software version will appear on the screen.


Settings menu when using the QUANT unit

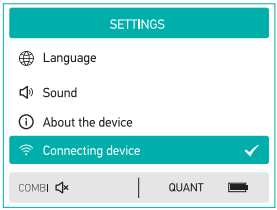


When working with the QUANT unit, an additional “Connect” option appears in the “Settings” menu.

The option is intended to connect a new QUANT unit in case of loss or damage of the existing one.

To install, connect the QUANT unit to the “SET” port on the back side of the “DeVita Combi” with cable No. 3

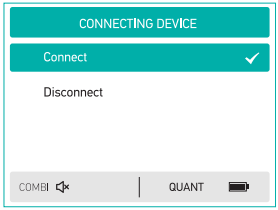


On the device screen, use the navigation buttons to select the "Connect" option Click the 'OK' button.

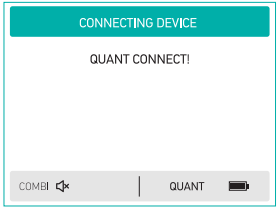

If the connection is successful, the message "QUANT CONNECTED!" should appear on the screen.

(Connection of more than 1 unit is not allowed).

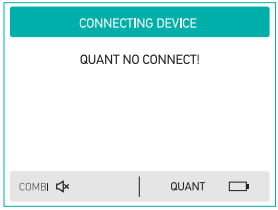

To disconnect an unused QUANT unit, follow the procedure outlined above by connecting it to the device and accessing the "Disconnect" option.


Upon completion of the disconnection process, the message "QUANT NOT CONNECTED!" will be displayed on the screen, confirming the successful disconnection.

Charging the QUANT unit

The QUANT unit is equipped with a battery, and its charge level can be assessed through the charge indicators located at the bottom of the display.

It is important to note that operation with the device is not possible when the charging indicator is red.

Charging the battery is facilitated by connecting the device to a computer or an external charger using cable No. 3.

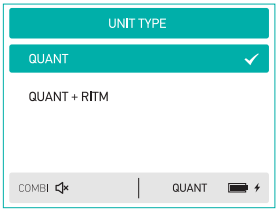

At the same time, a charging icon in the form of a "lightning bolt" will appear to the right of the charging indicator.

Safety information

Device is:

- non-toxic;

- not flammable;

- non-explosive;

When charging the battery, Class 3 devices must be powered exclusively by an external low-voltage AC-DC adapter.

Environmental Protection

The built-in battery of the QUANT unit contains substances that may pollute the environment. At the end of the device's life cycle and before handing it in for recycling, the battery must be removed. The battery must be disposed of at designated collection points. 

Safety instructions

CAUTION: Never connect the device to a power supply (adapter) if the power cord is damaged. Avoid attempting to repair the device independently. In the event of malfunction, please contact your local technical service centers for assistance.

CAUTION: Direct exposure of the QUANT unit to the eyes may cause discomfort.

CAUTION: To avoid accidental high voltage exposure of the electrotherapy when switching on the current, it is necessary to set the "INTENSITY" control knob to the MIN position.

Save

The device, when removed from the package, must be stored in a room with an air temperature of 10 to 35 °C and a relative humidity of no more than 80%.

To avoid interruptions, it is recommended not to leave the power supply unit connected to the device. It is recommended that you keep the packaging and all manuals of the device during the warranty period.

Transporting the device

Since the device contains a display that is sensitive to external mechanical influences, it is recommended during transport:

- to protect the device from drops
- to protect the device from sudden shocks
- to make sure that no other objects fall on the device

The device must be protected from moisture and the effects of active chemicals.

Manufacturer's Warranty

The manufacturer guarantees the compliance of the "DeVita Combi" all-in-one wellness device, with the technical specifications, provided that the consumer follow the rules of operation, transport, and storage.

The warranty period of the device is 24 months from the date of purchase from a retail store.

If the date of sale and the seller's seal are absent in the manual, the warranty period is calculated from the date of production by the manufacturer.

During the warranty period, owners are entitled to free repairs upon presentation of the warranty repair form. Warranty repairs are conducted exclusively at the manufacturer's facilities. However, the cost of shipping the defective device is the responsibility of the buyer.

Please note that repairs covered by warranty will not be accepted without the submission of an application for warranty repair and a certificate of acceptance. Additionally, violations of the device's seals may void warranty coverage.

The warranty does not cover damages resulting from:

- Poor handling;
- Natural wear and tear;
- Breach of security seals;
- External defects such as cracks or bumps.

The buyer has the right to replace the defective device with a new one in the following cases:

- the device has been repaired three times during the warranty period;
- the device cannot be repaired and warranty repair forms are included.

For technical information contact exclusive distributor:

Data Elis Cyprus

Address: 179 Agias Fylaxeos St, 1st floor, office 12, Limassol, 3882 Tel: +357 25222910

E-mail: detaeliscyprusltd@cytanet.com.cy

Skype: Data Elis Cyprus

Πολύ-Συσκευή
Ολοκληρωμένης
Αποκατάστασης

DeVita Combi

Εγχειρίδιο χρήσης / Διαβατήριο εγγύησης

Σκοπός της Συσκευής

Η πολύ-συσκευή ολοκληρωμένης αποκατάστασης (εφεξής συσκευή) χρησιμοποιείται για την ανακούφιση από την επιβάρυνση που προκαλείται από την παρουσία παρασιτικών φορτίων στο ανθρώπινο σώμα: ιούς, βακτήρια, μύκητες, πρωτόζωα, έλμινθες, καθώς και για την προστασία από παράγοντες άγχους, διατήρηση της ομοιόστασης, βελτίωση της απόδοσης, πρόληψη της πρόωρης γήρανσης.

Η συσκευή λειτουργεί σε 5 διαφορετικά πεδία δράσης

DeVita AP

Η λειτουργία της AP βασίζεται στα αποτελέσματα της έρευνας του μηχανικού R. Rife και των συνεχιστών του. Κάθε έμβιο ον έχει τη δική του ηλεκτρομαγνητική υπογραφή. Κύματα ορισμένης συχνότητας, που ταυτίζονται με την ιδιοσυχνότητα των μικροοργανισμών στόχων αναπαράγονται από τη συσκευή, εισέρχονται στον οργανισμό και σε συντονισμό με την ιδιοσυχνότητα των μικροοργανισμών, ενισχύουν τις φυσικές τούς ταλαντώσεις. Οι έντονες ταλαντώσεις που δημιουργούνται έχουν μοιραία αποτελέσματα για τους λοιμογόνους παράγοντες και τα παράσιτα. Η εξωτερική μονάδα AP εκπέμπει κύματα συγκεκριμένης συχνότητας για ορισμένους τύπους ιών, βακτηρίων, ελμινθών, πρωτόζωων και μυκήτων και επιτρέπει τον βαθύ καθαρισμό του σώματος από τις τοξίνες.

DeVita RITM

Η λειτουργία της Ritm βασίστηκε στις μακροχρόνιες έρευνες R. Voll, H. Schimmel, A.F. Kramer και άλλων επιστημόνων. Σύμφωνα με τις έρευνές τους, κάθε υγιές όργανο έχει τη δική του συχνότητα, η οποία διαφέρει από τη συχνότητα ενός ανάλογου εξασθενημένου οργάνου. Σε αυτή την περίπτωση, η συσκευή παράγει συχνότητες χαμηλής έντασης για διάφορα όργανα και συστήματα, προσομοιώνοντας συχνότητες υγιών οργάνων. Η επίδραση αυτών των συχνοτήτων «επαναδιαμορφώνει» το σώμα σε ένα σύνολο υγιών συχνοτήτων το οποίο, ως αποτέλεσμα, οδηγεί σε αύξηση των αποθεμάτων προσαρμογής και αποκατάσταση των διαδικασιών αυτορρύθμισης.

QUANT

Η δράση της συσκευής στο σώμα βασίζεται στα αποτελέσματα της έρευνας στον τομέα της κβαντικής θεωρίας του φωτός. Το ορατό φως έχει μια ευρεία φασματική σύνθεση χρώματος που αποτελείται από ακτινοβολία με διαφορετικά εύρη κύματος και συχνότητες. Κάθε χρώμα μπορεί να έχει κάποια επίδραση σε ορισμένα όργανα ή συστήματα μέσω των αισθητήρων της επιδερμίδας.

Ηλεκτροθεραπεία HV

Η λειτουργία της συσκευής βασίζεται στη χρήση ηλεκτρικών παλμών /πα-

ρορμήσεων , με επιλογές λειτουργίας ηλεκτροθεραπείας HV STEP και HV RAMPING, που εξαλείφουν διάφορες παθολογικές καταστάσεις. Οι επιλογές λειτουργίας είναι ενσωματωμένες στη συσκευή.

Προσοχη! Η χρήση της συσκευής επιτρέπεται από παιδιά MONO υπό την επίβλεψη ενηλίκων. Τα παιδιά απαγορεύεται να παίζουν με τη συσκευή. Άτομα με σωματικές ή διανοητικές αναπηρίες μπορούν να χρησιμοποιούν τη συσκευή MONO υπό την επίβλεψη κατάλληλου προσωπικού.


Περιεχόμενα συσκευασίας

Πολύ-συσκευή «DeVita COMBI»..... 1 τεμ.
Εξωτερική μονάδα AP(αντιπαρασιτική δράση- εικ. 1)..... 1 τεμ.
Εξωτερική μονάδα RITM (ρυθμιστική δράση- εικ. 2)..... 1 τεμ.
Μονάδα κβαντικού φωτός QUANT (εικ. 3)..... 1 τεμ.
Ηλεκτρόδια χεριών (εικ. 5)..... 2 τεμ.
Ηλεκτρόδια ποδιών (εικ. 6)..... 2 τεμ.
Σύνολο καλωδίων (εικ. 7)..... 1 τεμ.
Μονάδα τροφοδοσίας (εικ. 4)..... 1 τεμ.
Τσάντα μεταφοράς και αποθήκευσης της συσκευής..... 1 τεμ.
Εγχειρίδιο χρήσης / Διαβατήριο εγγύησης..... 1 τεμ.



Εικ. 1 - Εξ. μονάδα AP


Εικ. 2- Εξ. μονάδα Ritm


1

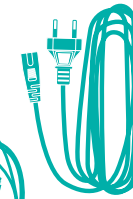
2


Εικ. 3 Μονάδα κβαντικού φωτός QUANT

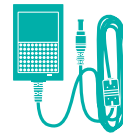
Εικ. 4 Μονάδα τροφοδοσίας


3


4


Εικ. 5 Ηλεκτρόδια χεριών


Εικ. 6 Ηλεκτροδια ποδιών

Εικ. 7 Σύνολο καλωδίων

Τεχνικές προδιαγραφές

Εξωτερική μονάδα AP

Κυματομορφή εξόδου.....διπολικοί παλμοί

Εύρος συχνότητων, Hz.....0,1 – 72000

Μέγιστο σφάλμα ρύθμισης συχνότητας, όχι περισσότερο από, %.....±0.01

Φέρουσα συχνότητα, MHz.....27

Συνολικές διαστάσεις, όχι μεγαλύτερες από, mm.....
Διάμετρος.....110

Βάρος, όχι περισσότερο από, Kg.....0,1

Εξωτερική μονάδα RITM

Κυματομορφή εξόδου.....διπολικοί παλμοί

Εύρος συχνότητων, Hz.....0,1 – 1000

Μέγιστο σφάλμα ρύθμισης συχνότητας, όχι περισσότερο από, %.....±0.01

Φέρουσα συχνότητα, kHz.....10

Συνολικές διαστάσεις, όχι μεγαλύτερες από, mm.....Διάμετρος.....110

Βάρος, όχι περισσότερο από, Kg.....0,1

Μονάδα κβαντικού φωτός QUANT

Διακύμανση επαναλαμβανόμενων παλμών, Hz.....0,1 – 1000

Μέγιστο σφάλμα ρύθμισης συχνότητας, όχι περισσότερο από, %.....±0.01

Οπτικό εύρος, nm.....468,525,590, 660, 880

Τροφοδοσία:

- μπαταρία Li-Pol 3,7V, τεμ.....1

- χρόνος συνεχούς λειτουργίας μπαταρίας, όχι περισσότερο από, ώρες.....10

- μέγιστος χρόνος φόρτισης μπαταρίας, ώρες.....8

Συνολικές διαστάσεις, όχι περισσότερες από, mm.....95 x 45 x 25

Βάρος, όχι περισσότερο από, Kg.....0,1

Ηλεκτροθεραπεία HV STEP και HV RAMPING

Σχήμα κυματομορφή εξόδου.....τετραγωνική θετική, τετραγωνική αρνητική, τετραγωνική θετική με απόσβεση, τετραγωνική αρνητική με απόσβεση

Μέγιστο πλάτος παλμού, όχι μικρότερο από, V.....200
Διάρκεια του παλμού στο επίπεδο των 0,5, ms.....1
Εύρος συχνοτήτων, Hz.....0,1 - 100
Μέγιστο σφάλμα ρύθμισης συχνότητας, όχι περισσότερο από, %.....±0.01

Μονάδα τροφοδοσίας:


Ανταπτοράς AC -DC.....GSM18B05-P1J 220V\50Hz, 5V\3A

Συσκευή «DeVita Combi»


Τύπος πληκτρολογίου.....αφής
Τύπος οθόνης.....TFT 240x320
Συνολικές διαστάσεις, όχι περισσότερες από, mm.....240x185x104
Βάρος:
χωρίς περιφερειακά και ανταλλακτικά, όχι περισσότερο από, kg.....0,8
σε πλήρες σετ, όχι περισσότερο από, kg.....2,5

Συνθήκες κατά τη λειτουργία:

θερμοκρασία περιβάλλοντος.....από 10 έως 35 °C
σχετική υγρασία.....80% σε θερμοκρασία 25 °C
Προσδοκώμενη διάρκεια ζωής, όχι λιγότερο από, χρόνια.....5

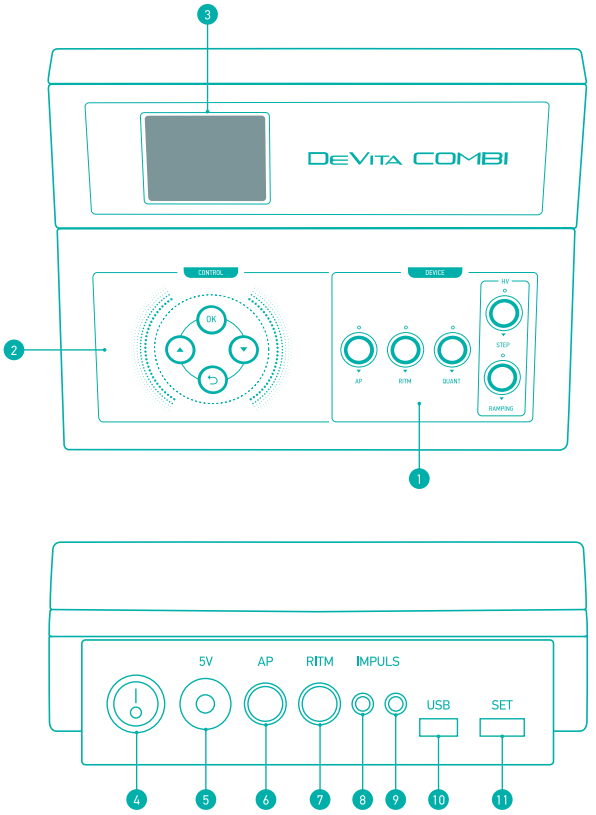

Εικ. 8 Εμφάνιση συσκευής:
μπροστινή όψη (πάνω), πίσω όψη (κάτω)

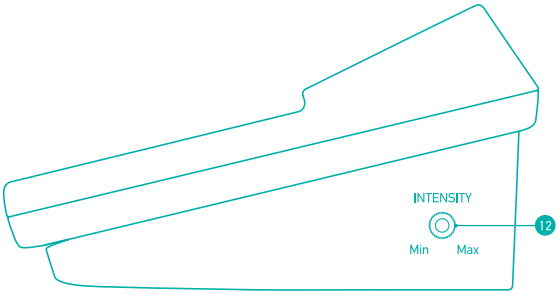

Εικ. 9 Εμφάνιση συσκευής
(δεξιά πλάγια όψη)

Σύνθεση συσκευής:

1. Πίνακας επιλογής δράσεων «DEVICE»
2. Πίνακας ελέγχου «CONTROL»
3. Οθόνη
4. Διακόπτης ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης
5. Υποδοχή σύνδεσης εξωτερικού τροφοδοτικού («5V»)
6. Υποδοχή σύνδεσης εξωτερικής μονάδας AP
7. Υποδοχή σύνδεσης εξωτερικής μονάδας RITM
8. Υποδοχή σύνδεσης ηλεκτροδίου στο «μείον» της μονάδας HV (μαύρο)
9. Υποδοχή σύνδεσης ηλεκτροδίου στο «συν» της μονάδας HV (κόκκινο)
10. Υποδοχή Micro-USB - για σύνδεση σε υπολογιστή
11. SET – τεχνολογική υποδοχή για τη ρύθμιση της διεύθυνσης της μονάδας QUANT μέσω bluetooth
12. INTENSITY – κουμπί ρύθμισης του πλάτους παλμού σε λειτουργία HV

Όροι χρήσης

1. Μην σκουπίζετε την επιφάνεια της συσκευής με οινόπνευμα και άλλους οργανικούς διαλύτες, αφαιρέστε τη βρωμιά με ελαφριές κινήσεις με μια μαλακή βούρτσα ή μια μπατονέτα ελαφρώς βρεγμένη με νερό.

2. Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε πολύ ζεστά, σκονισμένα και υγρά μέρη.

3. Μετά την αποθήκευση της συσκευής σε κρύο δωμάτιο ή μετά τη μεταφορά τής σε χειμερινές συνθήκες, η συσκευή μπορεί να ενεργοποιηθεί το νωρίτερο μετά από 1 ώρα διαμονής τής σε θερμοκρασία δωματίου

Προετοιμασία λειτουργίας της συσκευής

1. Συνδέστε το τροφοδοτικό στην υποδοχή τροφοδοσίας «5V» της συσκευής. Με το καλώδιο No 2, συνδέστε το τροφοδοτικό σε μια πρίζα 220V.


2. Συνδέστε το τροφοδοτικό σε μια πρίζα 220 V. Πατήστε το διακόπτη εναλλαγής λειτουργίας (No. 4 στην Εικ. 8), ενώ η ένδειξη μιας από τις λειτουργίες και η οθόνη στον πίνακα ελέγχου «DEVICE» θα ανάψουν.


3. Συνδέστε τις εξωτερικές μονάδες AP και/ή Ritm στη συσκευή με καλώδια No.1. Συνδέστε τα ηλεκτρόδια (χεριών ή ποδιών) με το καλώδιο No. 4. Οι αριθμοί των καλωδίων φαίνονται στην εικόνα 7.

4. Ρυθμίστε το κουμπί INTENSITY στη θέση MIN.

Χρήση της συσκευής

Μετά την ενεργοποίηση της συσκευής, στην οθόνη θα εμφανιστούν πληροφορίες σχετικά με τον τύπο της επιλεγμένης δράσης και η ένδειξη της αντίστοιχης λειτουργίας θα ανάψει στον πίνακα «DEVICE». Για να αλλάξετε τη μονάδα δράσης, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά επιλογής δράσης στον πίνακα «DEVICE».

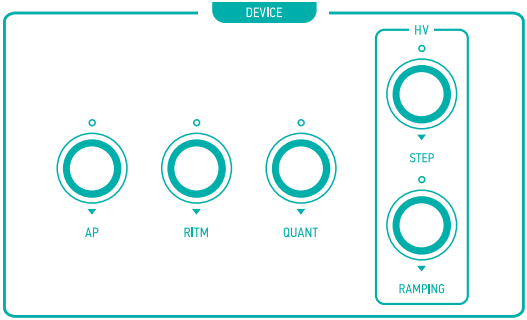

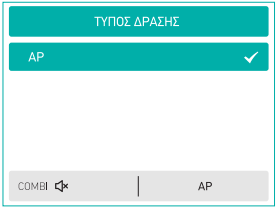


Το κάτω μέρος της οθόνης περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση έντασης του ήχου καθώς και πληροφορίες σχετικά με τον τύπο της επιλεγμένης μονάδας δράσης.

Εργασία με την εξωτερική μονάδα AP




Η εξωτερική μονάδα «AP» συνδέεται και ελέγχεται μέσω καλωδίου. Συνδέστε την εξωτερική μονάδα «AP» με το καλώδιο No. 1 στην υποδοχή «AP» στο πίσω μέρος της συσκευής «DeVita Combi» (βλ. Εικ. 8).

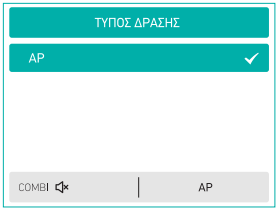

Πατήστε το κουμπί «AP» στον πίνακα «DEVICE».


OK Πατήστε το κουμπί «OK» στον πίνακα «CONTROL» για να συνεχίσετε.

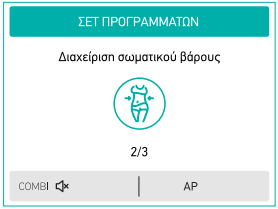

Θα εμφανιστεί το παράθυρο επιλογής ΣΕΤ προγραμμάτων.

Το παράθυρο εμφανίζει το τρέχον όνομα του ΣΕΤ προγραμμάτων, το εικονίδιό του και τον αριθμό του. Επίσης εμφανίζεται ο συνολικός αριθμός των υπολοίπων ΣΕΤ προγραμμάτων.

Για να επιλέξετε ένα ΣΕΤ προγραμμάτων, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά πλοήγησης στον πίνακα «CONTROL».

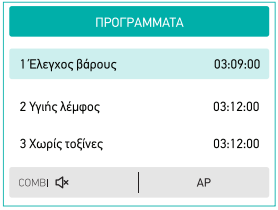


Όταν πατήσετε το κουμπί «OK», στην οθόνη θα εμφανιστεί το παράθυρο επιλογής προγράμματος.

Η επιλογή του προγράμματος πραγματοποιείται με τα κουμπιά πλοήγησης στον πίνακα «CONTROL».

Όταν πατηθεί το κουμπί «OK», το πρόγραμμα ενεργοποιείται.


Πριν ξεκινήσετε, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι η εξωτερική μονάδα AP είναι συνδεδεμένη.

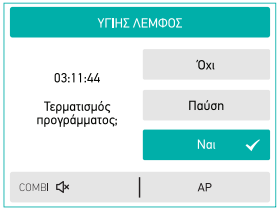

Το παράθυρο εκκίνησης του προγράμματος περιέχει το όνομα του προγράμματος, τον χρόνο που απομένει μέχρι την ολοκλήρωση του και ένα μενού για τη διαχείριση της λειτουργίας του προγράμματος.

Όταν ξεκινά το πρόγραμμα, η λυχνία LED στο AP θα πρέπει να ανάψει. Υποδεικνύει ότι η εξωτερική μονάδα είναι συνδεδεμένη σωστά.


Με την επιλογή «Παύση» και πατώντας το κουμπί «OK», το πρόγραμμα διακόπτεται προσωρινά. Σε αυτήν την περίπτωση, στην οθόνη εμφανίζεται ο χρόνος μέχρι το τέλος της παύσης.

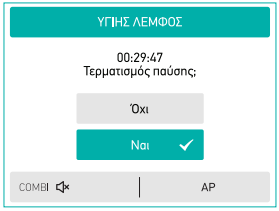

Η παύση σταματάει επιλέγοντας την επιλογή «Ναι» και πατώντας το κουμπί «OK» και μετά το πρόγραμμα θα συνεχίσει την εκτέλεσή του.

Εάν η παύση είναι ενεργοποιημένη και δεν πραγματοποιηθεί η επιλογή «Ναι», τότε το πρόγραμμα σταματά όταν παρέλθει ο χρόνος παύσης. Η συσκευή μεταβαίνει στο παράθυρο επιλογής προγράμματος.


Εργασία με την εξωτερική μονάδα Ritm

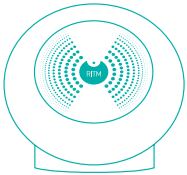

Η εξωτερική μονάδα «RITM» συνδέεται και ελέγχεται μέσω καλωδίου.


Συνδέστε την εξωτερική μονάδα «RITM» με το καλώδιο No. 1 στην υποδοχή «RITM» στο πίσω μέρος της συσκευής «DeVita Combi» (βλ. Εικ. 8).

Πατήστε το κουμπί «RITM» στον πίνακα «DEVICE».

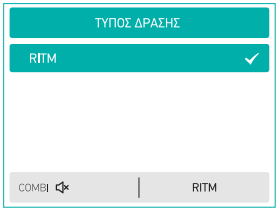

Η εργασία με την εξωτερική μονάδα «RITM» είναι παρόμοια με την εργασία με την εξωτερική μονάδα «AP».


Εργασία με την μονάδα κβαντικού φωτός QUANT

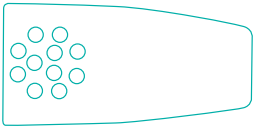

Η εργασία με την μονάδα κβαντικού φωτός «QUANT» πραγματοποιείται μέσω απομακρυσμένης προσάρτησης μέσω ασύρματου καναλιού Bluetooth. Βεβαιωθείτε ότι ο αριθμός της κβαντικής μονάδας QUANT αντιστοιχεί με τον αριθμό της συσκευής. Για να ξεκινήσετε, πατήστε το κουμπί «QUANT» στον πίνακα «DEVICE».



Η λειτουργία με τη μονάδα «QUANT» μπορεί να λειτουργήσει με δύο τρόπους: ανεξάρτητα και μαζί με τη λειτουργία «RITM». Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά πλοήγησης στον πίνακα «CONTROL» για να επιλέξετε την κατάλληλη λειτουργία. Στην κάτω δεξιά γωνία εμφανίζεται η κατάσταση της μπαταρίας της εξωτερικής μονάδας «QUANT».

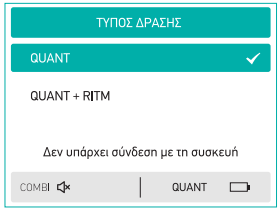

Εάν δεν υπάρχει σύνδεση μέσω Bluetooth, εμφανίζεται στην οθόνη το μήνυμα «Δεν υπάρχει σύνδεση με τη συσκευή» και η εικόνα της μπαταρίας αλλάζει.

Εάν δεν υπάρχει σύνδεση, η μετάβαση στην επιλογή των ΣΕΤ προγραμμάτων θα είναι αδύνατη.

Η επιλογή των ΣΕΤ προγραμμάτων και η επιλογή των προγραμμάτων πραγματοποιείται παρόμοια με τη μέθοδο που περιγράφεται για την εξωτερική μονάδα «AP».

Όταν επιλέγετε τη λειτουργία «QUANT+RITM», είναι απαραίτητο να ελέγξετε τη σύνδεση της εξωτερικής μονάδας «RITM».

Εργασία με τη μονάδα HV

Η συσκευή περιλαμβάνει μια γεννήτρια ηλεκτρικών παλμών, που βρίσκεται μέσα στη συσκευή «DeVita Combi», και εξωτερικά ηλεκτρόδια χεριών και ποδιών.


Τα ηλεκτρόδια συνδέονται με τα καλώδια No. 4 στις υποδοχές HV (+ κόκκινο, - μαύρο) στο πίσω μέρος της συσκευής (βλ. Εικ. 8).

Το κουμπί «INTENSITY» που βρίσκεται στη δεξιά κάτω πλευρά της συσκευής (βλ. Εικ. 9), ρυθμίζει το πλάτος των παλμών.

Η μονάδα «HV» μπορεί να λειτουργήσει τόσο ανεξάρτητα όσο και σε συνδυασμό με την εξωτερική μονάδα«RITM».

Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα «HV» μπορεί να λειτουργήσει με δύο τρόπους: «HV STEP»(με βηματισμό παλμού) και «HV RAMPING»(με επιταχυνόμενο παλμό).

Για να μεταβείτε στη λειτουργία «HV STEP» ή «HV RAMPING», πατήστε το αντίστοιχο κουμπί στον πίνακα «DEVICE».

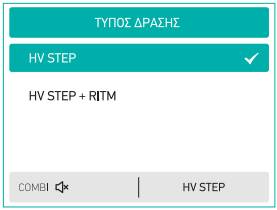




Η επιλογή των ΣΕΤ προγραμμάτων και των προγραμμάτων πραγματοποιείται παρόμοια με τη μέθοδο που περιγράφεται για την εξωτερική μονάδα «AP».

Ενότητα «Ρυθμίσεις»


Για να μεταβείτε στο μενού ρυθμίσεων, πατήστε το κουμπί πίσω.

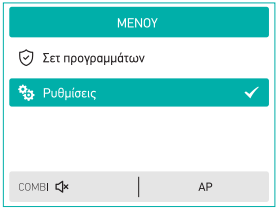

Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να επιλέξετε «Ρυθμίσεις» και πατήστε «OK» στον πίνακα «CONTROL».


Το μενού επιλογής ρυθμίσεων θα εμφανιστεί στην οθόνη.

Επιλογή γλώσσας

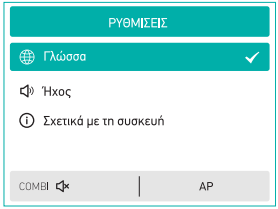


Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να επιλέξετε «Γλώσσα». Κάντε κλικ στο κουμπί «OK».

Το μενού ρυθμίσεων γλώσσας εμφανίζεται στην οθόνη.

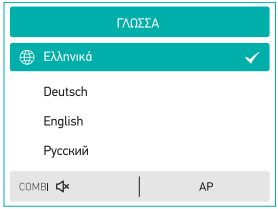


Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να επιλέξετε την επιθυμητή γλώσσα. Κάντε κλικ στο κουμπί «OK».

Ρυθμίσεις ήχου

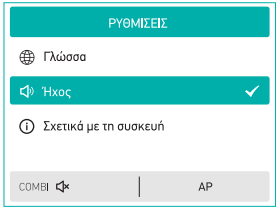

Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά πλοήγησης στο μενού ρυθμίσεων για να επιλέξετε «Ήχος». Πατήστε το κουμπί «OK».

Στην οθόνη εμφανίζεται το μενού «Ήχος».

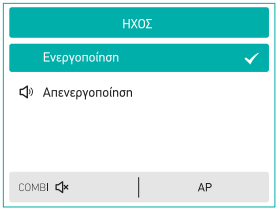

Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να επιλέξετε «Ενεργοποίηση» ή «Απενεργοποίηση». Κάντε κλικ στο κουμπί «OK». Με την επιλογή «Απενεργοποίηση» οι ήχοι κατά την πληκτρολόγηση θα απενεργοποιηθούν.


Σχετικά με τη συσκευή



Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να επιλέξετε «Σχετικά με τη συσκευή». Κάντε κλικ στο κουμπί «OK».

Στην οθόνη θα εμφανιστούν ο αριθμός παραγωγής της συσκευής σας και η έκδοση λογισμικού.


Μενού ρυθμίσεων όταν χρησιμοποιείται η κβαντική μονάδα φωτός QUANT

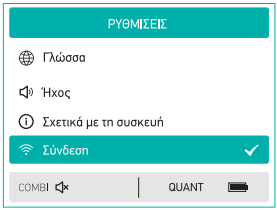


Όταν εργάζεστε με τη κβαντική μονάδα φωτός «QUANT», εμφανίζεται μια πρόσθετη επιλογή «Σύνδεση» στο μενού «Ρυθμίσεις».

Η επιλογή προορίζεται για τη σύνδεση μίας νέας μονάδας κβαντικού φωτός «QUANT» σε περίπτωση απώλειας ή βλάβης της υφιστάμενης.

Για εγκατάσταση, συνδέστε τη μονάδα «QUANT» στην υποδοχή «SET» στο πίσω μέρος της συσκευής «DeVita Combi» με το καλώδιο No. 3.

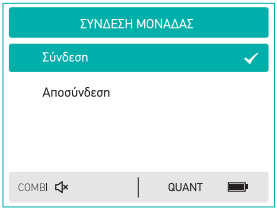


Στην οθόνη της συσκευής, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά πλοήγησης για να επιλέξετε την επιλογή «Σύνδεση» Κάντε κλικ στο κουμπί «OK».

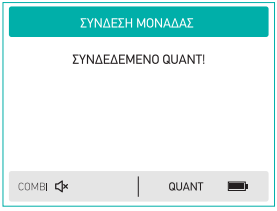

Εάν η σύνδεση είναι επιτυχής, στην οθόνη θα πρέπει να εμφανίζεται το μήνυμα «ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ QUANT!».

(Δεν επιτρέπεται η σύνδεση περισσότερων από 1 μονάδα).

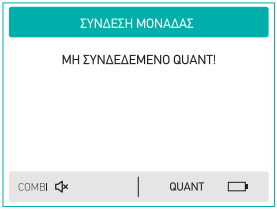

Για να αποσυνδέσετε μια αχρησιμοποίητη μονάδα κβαντικού φωτός «QUANT», πρέπει (σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία) να τη συνδέσετε στη συσκευή και να χρησιμοποιήσετε την επιλογή «Αποσύνδεση».

Στο τέλος της διαδικασίας, στην οθόνη θα πρέπει να εμφανίζεται το μήνυμα «ΜΗ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ QUANT!»

Φόρτιση της κβαντικής μονάδας QUANT

Η μονάδα QUANT διαθέτει μπαταρία. Το επίπεδο φόρτισης μπορεί να κριθεί από τις ενδείξεις φόρτισης στο κάτω μέρος της οθόνης.

Είναι αδύνατο να εργαστείτε με τη συσκευή όταν οι ενδείξεις φόρτισης είναι κόκκινες.

Η μπαταρία φορτίζεται μέσω υπολογιστή ή προσαρμογέα ρεύματος χρησιμοποιώντας το καλώδιο No. 3.



Ταυτόχρονα, ένα εικονίδιο φόρτισης με τη μορφή «κεραυνού» θα εμφανιστεί στα δεξιά της ένδειξης φόρτισης.

Πληροφορίες ασφαλείας

Συσκευή:

- μη τοξική
- μη εύφλεκτη
- μη εκρηκτική

Κατά τη φόρτιση της μπαταρίας, οι συσκευές που ανήκουν στην κλάση 3, πρέπει να τροφοδοτούνται αποκλειστικά από έναν εξωτερικό αντάπτορα AC-DC χαμηλής τάσης.

Προστασία περιβάλλοντος

Η ενσωματωμένη μπαταρία περιέχει ουσίες που ενδέχεται να μολύνουν το περιβάλλον. Μετά τη λήξη του κύκλου ζωής της συσκευής και προτού την παραδώσετε για ανακύκλωση, η μπαταρία πρέπει να αφαιρεθεί. Η μπαταρία πρέπει να απορριφθεί σε ειδικά σημεία. 

Οδηγίες ασφαλείας

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μη συνδέετε τη συσκευή με τροφοδοτικό (αντάπτορα) που έχει χαλασμένο καλώδιο ρεύματος.

Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας. Σε περίπτωση δυσλειτουργίας, επικοινωνήστε με τα κατά τόπους κέντρα τεχνικής εξυπηρέτησης.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απευθείας έκθεση της μονάδας κβαντικού φωτός «QUANT» στα μάτια μπορεί να προκαλέσει δυσφορία.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την αποφυγή τυχαίας έκθεσης υψηλής τάσεως της ηλεκτροθεραπείας κατά την ενεργοποίηση του ρεύματος, είναι απαραίτητο να ρυθμίσετε το κουμπί «INTENSITY» στη θέση MIN.

Αποθήκευση

Η συσκευή, όταν αφαιρεθεί από τη συσκευασία, πρέπει να φυλάσσεται σε δωμάτιο με θερμοκρασία αέρα από 10 έως 35 °C και σχετική υγρασία όχι μεγαλύτερη από 80%.

Για να αποφύγετε διακοπές, συνιστάται να μην αφήνετε τη μονάδα τροφοδοσίας συνδεδεμένη στη συσκευή. Συνιστάται να φυλάξετε τη συσκευασία και όλα τα εγχειρίδια της συσκευής για την περίοδο ισχύος της εγγύησης.

Μεταφορά

Δεδομένου ότι η συσκευή περιέχει μια οθόνη που είναι ευαίσθητη σε εξωτερικές μηχανικές επιδράσεις, συνιστάται κατά τη μεταφορά:

- προστατέψτε τη συσκευή από πτώσεις
- προστατέψτε τη συσκευή από απότομούς κραδασμούς
- φροντίστε να μην πέφτουν επάνω στη συσκευή άλλα αντικείμενα

Η συσκευή πρέπει να προστατεύεται από την υγρασία και τις επιπτώσεις των δραστικών χημικών ουσιών.

Εγγύηση Κατασκευαστή

Ο κατασκευαστής εγγυάται τη συμμόρφωση της συσκευής ολοκληρωμένης αποκατάστασης «DeVita Combi» με τις τεχνικές προδιαγραφές, μόνο εφόσον ο καταναλωτής τηρεί τους κανόνες λειτουργίας, μεταφοράς και αποθήκευσης.

Η διάρκεια ισχύος της εγγύησης της συσκευής είναι 24 μήνες από την ημερομηνία αγοράς από κατάστημα λιανικής πώλησης.

Σε περίπτωση απουσίας της ημερομηνίας πώλησης και της σφραγίδας του πωλητή στο εγχειρίδιο, η περίοδος εγγύησης υπολογίζεται από την ημερομηνία παραγωγής από τον κατασκευαστή.

Κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, ο ιδιοκτήτης δικαιούται δωρεάν επισκευή με την προσκόμιση του εντύπου επισκευής εγγύησης.

Οι επισκευές στα πλαίσια της εγγύησης πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις του κατασκευαστή. Το κόστος αποστολής της ελλαττωματικής συσκευής επιβαρύνει τον αγοραστή.

Δεν θα γίνονται δεκτές επισκευές, που καλύπτονται από εγγύηση, χωρίς την προσκόμιση αίτησης για επισκευή εγγύησης και πιστοποιητικού αποδοχής και (ή) σε περίπτωση παραβίασης των σφραγίδων της συσκευής.

Η εγγύηση δεν καλύπτει τις ακόλουθες βλάβες:

- ελαττώματα που προκαλούνται από κακό χειρισμό
- ελαττώματα που προκαλούνται από φυσικές φθορές
- παραβίαση των σφραγίδων ασφαλείας
- παρουσία εξωτερικών ελαττωμάτων (ρωγμές, χτυπήματα κ.λπ.).

Ο αγοραστής έχει το δικαίωμα να αντικαταστήσει την ελαττωματική συσκευή με νέα στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- η συσκευή έχει επισκευαστεί τρεις φορές κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης

- η συσκευή δεν μπορεί να επισκευαστεί και συμπεριλαμβάνονται τα έντυπα επισκευής εγγύησης.

Για τεχνικές πληροφορίες επικοινωνήστε με τον αποκλειστικό διανομέα:

Deta Elis Cyprus

Διεύθυνση: Αγίας Φυλάξεως 179, 1ος όροφος, γραφ. 12, Λεμεσός, 3882

Τηλ: +357 25222910

E-mail: detaeliscyprusltd@cytanet.com.cy

Skype:

Deta Elis Cyprus

Аппарат
комплексного
оздоровления

DeVita Combi

Руководство по эксплуатации • Паспорт

Назначение

Аппарат комплексного оздоровления (в дальнейшем устройство) используется для снятия стрессового отягощения, вызванного присутствием в организме человека паразитарных форм: вирусов, бактерий, грибков, простейших, гельминтов, а также для защиты от стресс-факторов, поддержания гомеостаза, улучшения работоспособности, предотвращения преждевременного старения.

Устройство состоит из 5 блоков

Блок AP

Действие блока основано на результатах исследований инженера Р. Райфа и его последователей. Каждое живое существо обладает собственным электромагнитным излучением. Волны определенной частоты, воспроизводимые блоком, вступают в резонанс с собственным излучением микроорганизмов, усиливая их естественные колебания, которые становятся гибельными для паразитов. Блок AP работает на частотах колебаний для определенных видов вирусов, бактерий, гельминтов, простейших и грибков, и позволяет провести глубокую очистку организма от токсинов.

Блок RITM

Действие блока основано на исследованиях ученых Р. Фолля, Х. Шиммеля, А.Ф. Крамера, занимавшихся изучением электромагнитного излучения организма. Было установлено, что каждый орган имеет свои собственные колебания, которые у ослабленных органов отличаются от здоровых. Блок работает на биорезонансных частотах малой интенсивности для различных органов и систем, имитирующих колебания здоровых органов. Воздействие этих частот «перенастраивает» организм на здоровую волну, что, в результате, приводит к повышению резервов адаптации и восстановлению процессов саморегуляции.

Блок QUANT

Воздействие блока на организм основано на использовании источников видимого и инфракрасного цвета, которые локально воздействуют на различные участки кожи тела человека.

Блок помогает избавиться от многих проблем со здоровьем путем регуляции биоэнергетического потенциала организма.

Блоки HV

Блоки расположены внутри устройства. Работа блоков электроакупунктуры HV STEP и HV RAMPING основана на использовании электрических импульсов, устраняющих различные патологические состояния.

Внимание! Устройство может использоваться детьми только под присмотром взрослых. Детям запрещено играть с устройством. Лица с ограниченными физическими возможностями и умственными нарушениями могут использовать устройство только под присмотром соответствующего персонала.

Комплектность

Устройство «DeVita COMBI»..... 1 шт.
Антенна AP..... 1 шт.
Антенна RITM..... 1 шт.
Приставка QUANT..... 1 шт.
Электроды для рук..... 2 шт.
Электроды для ног..... 2 шт.
Комплект проводов..... 1 шт.
Блок питания..... 1 шт.
Сумка для переноски и хранения устройства..... 1 шт.
Руководство по эксплуатации/паспорт..... 1 шт.



Рис. 1 Антенна AP




Рис. 2 Антенна Ritm



Рис. 3 Приставка QUANT



1

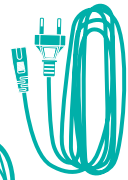

2



Рис. 4 Блок питания



Рис. 5 Электроды для рук



Рис. 6 Электроды для ног



3



4

Рис. 7 Комплект проводов

Технические характеристики

Блок АР

Форма выходного сигнала.....двухполярные пачки импульсов

Диапазон частоты, Гц.....0,1 – 72000

Максимальная погрешность установки частоты, не более, %.....±0.01

Частота заполнения, МГц.....27

Габаритные размеры антенны, не более, мм.....Диаметр.....110

Масса антенны, не более, кг.....0,1

Блок RITM

Форма выходного сигнала.....двухполярные пачки импульсов

Диапазон частоты, Гц.....0,1 – 1000

Максимальная погрешность установки частоты, не более, %.....±0.01

Частота заполнения, кГц.....10

Габаритные размеры антенны, не более, мм.....Диаметр.....110

Масса антенны, не более, кг.....0,1

Блок QUANT

Диапазон частоты следования импульсов, Гц.....0,1 – 1000

Максимальная погрешность установки частоты, не более, %.....±0.01

Оптический диапазон, нм.....468, 525, 590, 660, 880

Питание:

- аккумулятор Li-Pol 3,7В, шт.....1
- время непрерывной работы от батареи не более, час.....10
- максимальное время зарядки аккумулятора, час.....8

Габаритные размеры, не более, мм.....95 x 45 x 25

Масса, не более, кг.....0,1

Блоки электроакупунктуры HV STEP и HV RAMPING

Форма выходного сигнала.....прямоугольный положительный, прямоугольный отрицательный, прямоугольный положительный с гиперболическим затуханием, прямоугольный отрицательный с гиперболическим затуханием

Максимальная амплитуда импульса, не менее, В.....200

Длительность импульса на уровне 0,5, мс.....1

Диапазон частоты, Гц.....0,1 - 100

Максимальная погрешность установки частоты, не более, %.....±0.01

Блок питания

Сетевой адаптер.....GSM18B05-P1J 220В\50Гц, 5В\3А

Устройство «DeVita Combi»

Тип клавиатуры.....сенсорная

Тип дисплея.....TFT 240x320

Габаритные размеры не более, мм..... 240x185x104

Масса:

без принадлежностей и запасных частей, не более, кг 0,8

в полном комплекте, не более, кг.....2,5

Рабочие условия в эксплуатации:

температура окружающей среды.....от 10 до 35˚С

относительная влажность воздуха.....80% при температуре 25˚С

Средний срок службы не менее, лет.....5

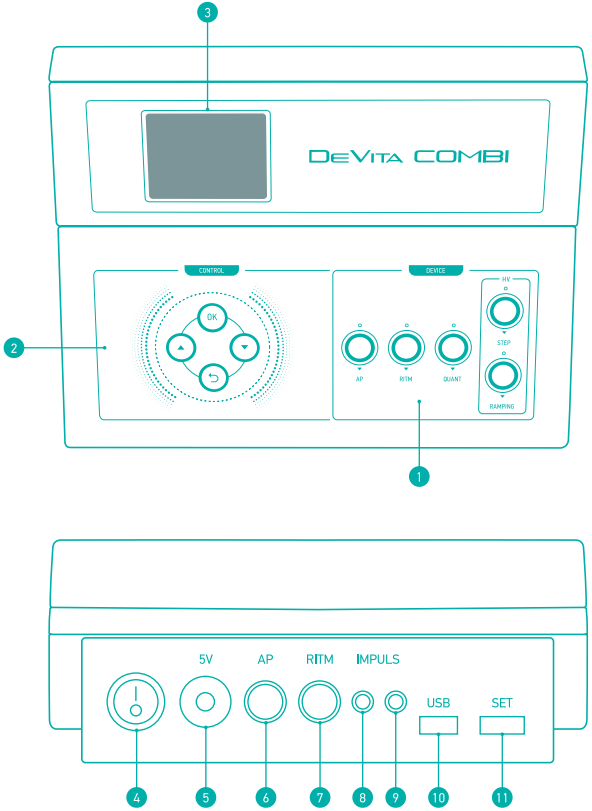


Рис. 8 Внешний вид устройства:
вид спереди(сверху), вид сзади(внизу)

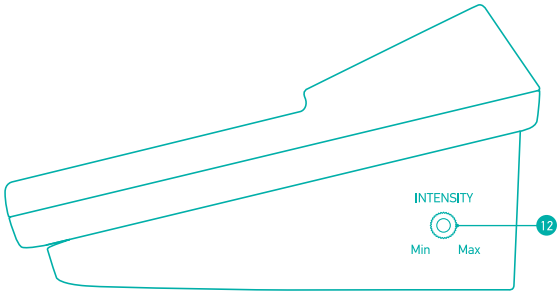


Рис. 9 Внешний вид устройства
(вид справа)

Состав устройства

1. Панель управления «DEVICE»
2. Панель управления «CONTROL»
3. Дисплей
4. Тумблер включения питания
5. Разъем «5V» подключения внешнего источника питания
6. Разъем подключения антенны AP
7. Разъем подключения антенны RITM
8. Разъем подключения электрода к «минусу» блока HV (черный)
9. Разъем подключения электрода к «плюсу» блока HV (красный)
10. Micro-USB - для подключения к компьютеру
11. SET – технологический разъём для установки адреса блока QUANT по bluetooth
12. INTENSITY – ручка регулятора амплитуды импульсов в режиме HV

Условия эксплуатации

1. Не протирать поверхности устройства спиртом и другими органическими растворителями, загрязнения удалять легкими усилиями мягкой кисточкой или слегка увлажненной водой ваткой.

2. Не помещать устройство вблизи чрезмерно теплых, запыленных, влажных мест.

3. После хранения устройства в холодном помещении или после перевозки в зимних условиях его можно включить не раньше, чем через 1 час пребывания при комнатной температуре.

Подготовка устройства к работе

1. Подключить блок питания к разъему питания «5V» устройства. Проводом №2 блок питания подключить к розетке 220В.


2. Включить блок питания в розетку с напряжением 220В. Нажать тумблер включения питания (№4 на рис. 8), при этом на панели управления «DEVICE» включится индикатор одного из блоков и дисплей.


3. Подключить к устройству антенны AP и/или Ritm проводами №1. Проводом №4 подключите электроды (ручные или ножные). Номера проводов указаны на рисунке 7.

4. Ручку «INTENSITY» установить в положение «MIN».

Работа с устройством


После включения устройства на дисплее появится информация о типе выбранного блока и загориться индикатор соответствующего блока на панели «DEVICE». Для выбора другого блока необходимо использовать кнопки выбора на панели «DEVICE».

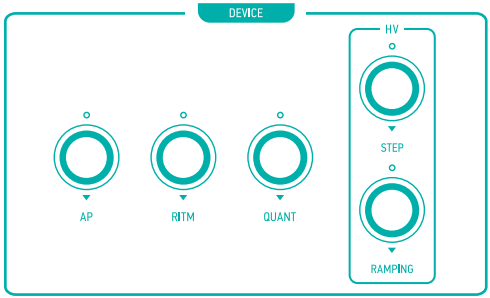

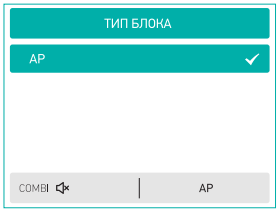


В нижней части экрана дисплея расположена информация о состоянии звукового излучателя, а также информация о типе выбранного блока.

Работа с блоком AP

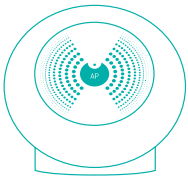


Блок AP – содержит антенну, управление которой осуществляется по проводу.

Подключите антенну AP проводом №1 к разъему «AP» на задней стороне устройства «DeVita Combi» (см. рис. 8).

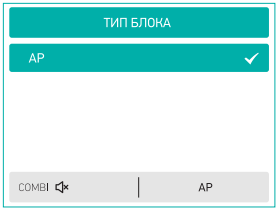

Нажмите кнопку «АР» на панели «DEVICE».


OK Для продолжения работы нажмите кнопку «ОК» на панели «CONTROL».

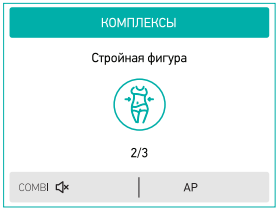

Появится окно выбора комплексов.

В окне отображаются название комплекса, его иконка, номер текущего комплекса и общее количество комплексов.

Для выбора комплекса необходимо использовать кнопки перемещения на панели «CONTROL».

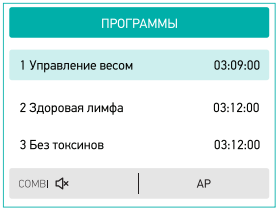


При нажатии кнопки «ОК» на дисплее появится окно выбора программ.

Выбор программы осуществляется кнопками перемещения на панели «CONTROL».

При нажатии кнопки «ОК» программа запускается на выполнение.


Перед запуском необходимо убедиться в подключении антенна АР.

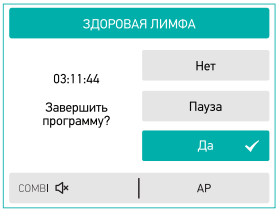

Окно запуска программ содержит название программы, оставшееся время до завершения и меню управления работой программы.

При запуске программы на антенне АР должен зажечься светодиод. Он показывает, что антенна подключена правильно.

При выборе опции «Пауза» и нажатии кнопки «ОК» программа, временно, приостанавливает работу. При этом на дисплее отображается время до завершения паузы.

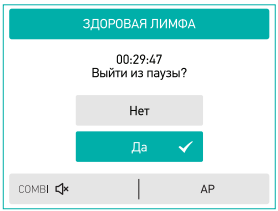

Выход из паузы осуществляется выбором опции «Да» и нажатием кнопки «ОК» после чего программа продолжит свое выполнение.

Если пауза включена, а опция «Да» не выбрана, то по окончании времени паузы программа останавливается. Блок переходит в окно выбора программ.


Работа с блоком Ritm



Блок RITM – содержит антенну, управление которой осуществляется по проводу.


Подключите антенну RITM проводом № 1 к разъему «RITM» на задней стороне устройства «DeVita Combi» (см. рис. 8).

Нажмите кнопку «RITM» на панели «DEVICE».

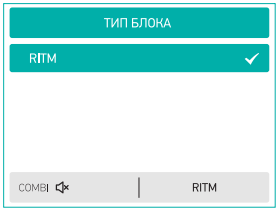

Дальнейшая работа с блоком RITM аналогична работе с блоком AP.

Работа с блоком QUANT

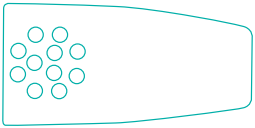


Работа с блоком «QUANT» осуществляется через выносную приставку по беспроводному каналу Bluetooth. Номер квантовой насадки должен совпадать с номером прибора!

Для начала работы нажмите кнопку «QUANT» на панели «DEVICE».



Блок QUANT может работать в двух режимах: самостоятельно и совместно с блоком RITM. Для выбора соответствующего режима воспользуйтесь кнопками перемещения на панели «CONTROL». В нижнем правом углу отображается состояние батареи приставки QUANT.

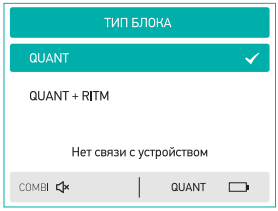

При отсутствии связи по каналу Bluetooth, на дисплее появляется сообщение «Нет связи с устройством» и изменяется изображение батареи.

При отсутствии связи переход на выбор комплексов будет невозможен.

Выбор комплексов и выбор программ осуществляется аналогично методике, изложенной для блока AP.

При выборе режима QUANT+RITM необходимо проконтролировать подключение антенны RITM.

Работа с блоками HV


В состав блоков входит генератор электрических импульсов, находящийся внутри устройства «DeVita Combi», электроды для рук и ног.

Электроды подключаются при помощи кабелей № 4 к разъемам HV(+ красный; - чёрный) на задней стенке устройства (см. Рис. 8).

Ручкой «INTENSITY», на правой стенке корпуса устройства (см. Рис. 9), регулируется амплитуда электрических импульсов.

Блоки HV могут работать в двух режимах: самостоятельно и совместно с блоком RITM.

Для выбора блока HV STEP или HV RAMPING нажмите соответствующую кнопку на панели «DEVICE».

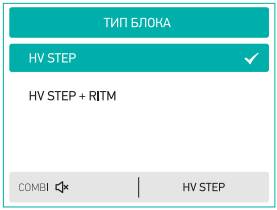




Выбор комплексов и выбор программ осуществляется аналогично методике, изложенной для блока АР.

Работа с режимом «Настройки»


Для перехода в меню настроек нажмите кнопку возврата.

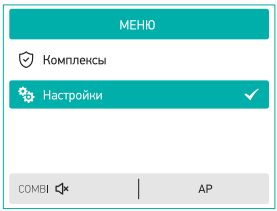

Кнопками перемещения выберите пункт «Настройки» и нажмите «ОК» на панели «CONTROL».


На дисплее появится окно выбора настроек.

Выбор языка

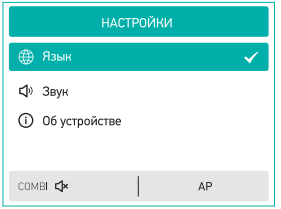


Кнопками перемещения выберите пункт «Язык». Нажмите кнопку «OK».

На дисплее появится меню установки языка.

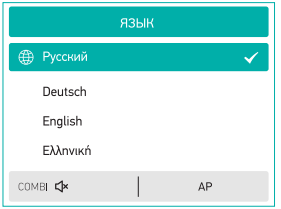


Кнопками перемещения выберите нужный язык. Нажмите кнопку «OK».

Настройка звука

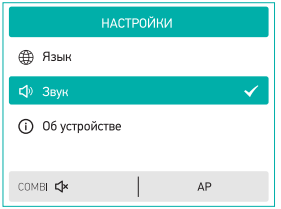

Кнопками перемещения в меню настройки выберите пункт «Звук». Нажмите кнопку «OK».

На дисплее появится меню «Звук».

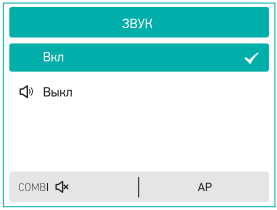

Кнопками перемещения выберите пункт «Вкл» или «Выкл». Нажмите кнопку «OK». При выборе пункта «Выкл.» звуковое сопровождение нажатия клавиш отключается.


Об устройстве



Кнопками перемещения выберите пункт «Об устройстве». Нажмите кнопку «OK».

На дисплее появится номер вашего устройства и версия программы.


Меню настройки при использовании блока QUANT

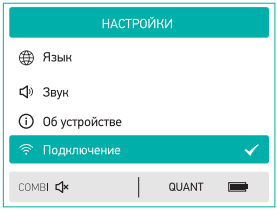

При работе с блоком QUANT в меню «Настройки» появляется дополнительная опция «Подключение».


Опция предназначена для настройки связи по каналу Bluetooth новой приставки QUANT (при утере) или выходе из строя штатной приставки.

Для настройки подключите приставку QUANT к разъему «SET» на задней стенке устройства «DeVita Combi» проводом №3.

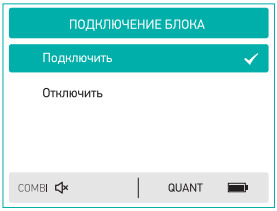


На дисплее устройства кнопками перемещения выберите опцию «Подключить»

Нажмите кнопку «OK».

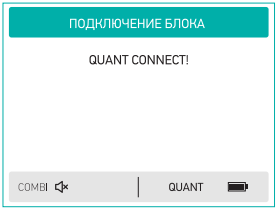

При удачном подключении на дисплее должно быть сообщение «QUANT CONNECT!».

(Не допускается подключение более 1 приставки).

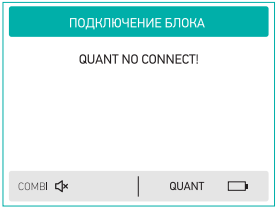

Для блокировки неиспользуемой приставки QUANT, необходимо (по изложенной выше процедуре) подключить её к устройству и воспользоваться опцией «Отключить».

По окончании процедуры на дисплее должно быть сообщение «QUANT NO CONNECT!».

Зарядка блока QUANT


Индикатор заряда аккумулятора

В блоке QUANT находится аккумулятор.

Уровень заряда можно оценить по индикатору заряда в нижней части дисплея.

Работать с блоком при красном цвете индикатора заряда нельзя.

Зарядка аккумулятора производится через компьютер или сетевой адаптер с помощью кабеля №3.

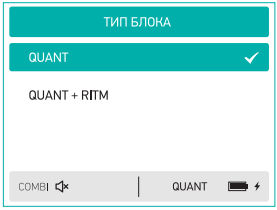

При этом справа от индикатора заряда появится значок зарядки в виде «молнии».

Информация о безопасности

Устройство:

- нетоксично;

- не является легковоспламеняющимся;

- невзрывоопасно;

При зарядке аккумулятора устройства класса III должны питаться от сетевого адаптера исключительно безопасного низковольтного напряжения.

Защита окружающей среды

Встроенный аккумулятор содержит вещества, загрязняющие окружающую среду. После окончания срока службы устройства и перед тем как передать его на утилизацию аккумулятор необходимо извлечь. Аккумулятор следует утилизировать в специальных пунктах. 

Указания мер безопасности

ВНИМАНИЕ: Не подключать к устройству блок питания, имеющий повреждения шнура питания.

Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать устройство. При возникновении неисправности обращайтесь в центры технического обслуживания.

ВНИМАНИЕ: Прямое воздействие блока QUANT на органы зрения может вызвать ощущение дискомфорта.

ВНИМАНИЕ: Во избежание случайного воздействия при включении питания необходимо ручку «INTENSITY» установить в положении MIN.

Хранение

Устройство без упаковки должно храниться в помещении при температуре воздуха от 10 до 35 °С и относительной влажности воздуха не более 80%.

Во избежание обрывов рекомендуется блок питания не оставлять подключенным к устройству. Рекомендуется сохранять упаковочную тару в течение гарантийного срока.

Транспортирование

Поскольку устройство содержит дисплей, чувствительный к внешним механическим воздействиям, рекомендуется при транспортировании:

- оберегать утройство от тряски, резких толчков;

- не допускать падения устройства;

- не допускать падения на устройство других предметов.

Устройство должно быть защищено от попадания влаги и действия активных химических веществ.

Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие аппарата комплексного оздоровления DeVita Combi техническим характеристикам при соблюдении потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации устройства 24 месяца со дня продажи через розничную сеть.

При отсутствии даты продажи и штампа торговой организации в талонах на гарантийный ремонт гарантийный срок исчисляется со дня выпуска устройства предприятием-изготовителем.

В течение гарантийного срока эксплуатации владелец имеет право на бесплатный ремонт по предъявлению талона на гарантийный ремонт.

Гарантийный ремонт производится на территории предприятия-изготовителя. Транспортирование неисправного устройства осуществляется за счет покупателя.

Без предъявления талона на гарантийный ремонт и свидетельства о приемке и (или) при нарушении сохранности пломб устройства претензии не принимаются, и гарантийный ремонт не производится.

Гарантия не распространяется на следующие неисправности:

- дефекты вследствие неправильной эксплуатации;

- дефекты, вызванные стихийными бедствиями;

- при нарушении сохранности пломб;

- при наличии внешних дефектов (трещин, сколов и др.).

Покупатель имеет право заменить неисправное устройство на новое в следующих случаях:

- устройство ремонтировалось три раза в течение гарантийного срока;
- устройство не подлежит ремонту.

Гарантийные талоны прилагаются.

DETA ELIS Europa GmbH

TECHNICAL FILE

EC DECLARATION OF CONFORMITY

EC Declaration of Conformity
Nr.W17

CE

The company **DETA-ELIS EUROPA GMBH** with a seat at Kaiserstr. 74, 63065 Offenbach, Germany

Herewith to DECLARE

That the equipment described below complies with all applicable at the time of construction essential requirements of the **Directive 2011/65/EU (RoHS)** and the **Directive 2014/30/EU (EMC).**
This declaration relates exclusively to the equipment in the state in which it was placed on the market, and excludes alterations or manipulations, components which are added and/or operations carried out subsequently by the final user without our official consent.

Equipment: DeVita
Type / Model: Combi
Standards Applied: IEC 61000-4-2-2008
GOST P МЭК 60601-2:2014
GOST 52770:2007
GOST ISO 10993-1-2-5-10-11-12-18-2011

Date: 01 October 2018

Authorized Representative: The General Manager Ms. Konopleva Tatyana

Title of Signatory:

Company Stamp:

DETA ELIS
Europa GmbH
Kaiserstr. 74,
63065 Offenbach, Germany
Tel.. 0049-69-8855828650 Fax: 0049-69-8855828629
info@deholding.org
www.deholding.info

Abnahmebescheinigung

Das Gerät „DeVita Combi“ wurde in Übereinstimmung mit den verbindlichen Anforderungen der staatlichen Standarts und der gültigen technischen Dokumentation hergestellt und abgenommen und seine Betriebsfähigkeit wird bescheinigt.

Seriennummer _____

Bestätigung des technischen Prüfers:

Stempel_____ _____

(Unterschrift) (Name des Unterzeichners)

„____“ _____ 20__.

(Herstellungsdatum)

Garantieschein Nr.1

Zur Inanspruchnahme einer Garantiereparatur von „DeVita Combi“

Übergabe am „____“ _____ 20__ . Reparaturen durchgeführt von _____
(Name, Unterschrift)



Deta-Elis Europa GmbH

Kaiserstrasse 74, 63065 Offenbach, Germany

Garantieschein Nr.1 zur Inanspruchnahme einer Garantiereparatur

Gerät: „DeVita Combi“

Seriennummer _____

Verkauft am Betrieb _____
(Handelsbetrieb)

Verkaufsdatum „____“_____ 20__.

Stempel des Betriebs _____
(Unterschrift)

Kunde _____

Adresse des Kunden _____

_____

Unterschrift des Kunden _____

Datum der Übergabe des Reparaturgegenstandes „____“_____ 20__ .

Instandsetzungsmassnahmen wurden wie folgt durchgeführt:

_____

_____

Reparaturendurchgeführtvon _____

_____
(Datum, Unterschrift)

Kunde _____
(Datum, Unterschrift)

Reparaturwerkstatt _____

_____

Stempel

„____“_____ 20__.

Der Verantwortliche _____
(Unterschrift)

Garantieschein Nr.2

Zur Inanspruchnahme einer Garantiereparatur von „DeVita Combi“

Übergabe am „____“ _____ 20__ . Reparaturen durchgeführt von _____
(Name, Unterschrift)



Deta-Elis Europa GmbH

Kaiserstrasse 74, 63065 Offenbach, Germany

Garantieschein Nr.2 zur Inanspruchnahme einer Garantiereparatur

Gerät: „DeVita Combi“

Seriennummer _____

Verkauft am Betrieb _____
(Handelsbetrieb)

Verkaufsdatum „____“ _____ 20__.

Stempel des Betriebs _____
(Unterschrift)

Kunde _____

Adresse des Kunden _____

_____

Unterschrift des Kunden _____

Datum der Übergabe des Reparaturgegenstandes „____“ _____ 20__ .

Instandsetzungsmassnahmen wurden wie folgt durchgeführt:

_____

_____

Reparaturendurchgeführtvon _____

_____
(Datum, Unterschrift)

Kunde _____
(Datum, Unterschrift)

Reparaturwerkstatt _____

_____

Stempel

„____“ _____ 20__.

Der Verantwortliche _____
(Unterschrift)

Garantieschein Nr.3

Zur Inanspruchnahme einer Garantiereparatur von „DeVita Combi“

Übergabe am „____“ _____ 20__ . Reparaturen durchgeführt von _____
(Name, Unterschrift)



Deta-Elis Europa GmbH

Kaiserstrasse 74, 63065 Offenbach, Germany

Garantieschein Nr.3 zur Inanspruchnahme einer Garantiereparatur

Gerät: „DeVita Combi“

Seriennummer _____

Verkauft am Betrieb _____
(Handelsbetrieb)

Verkaufsdatum „____“ _____ 20__.

Stempel des Betriebs _____
(Unterschrift)

Kunde _____

Adresse des Kunden _____

_____

Unterschrift des Kunden _____

Datum der Übergabe des Reparaturgegenstandes „____“ _____ 20__ .

Instandsetzungsmassnahmen wurden wie folgt durchgeführt:

_____

_____

Reparaturendurchgeführtvon _____

_____
(Datum, Unterschrift)

Kunde _____
(Datum, Unterschrift)

Reparaturwerkstatt _____

_____

Stempel

„____“ _____ 20__.

Der Verantwortliche _____
(Unterschrift)

Notizen

www.deholding.info

Deta-Elis Europa GmbH Kaiserstrasse 74,
63065 Offenbach, Deutschland